



2026





**„Auf meinen Bruder Jonas und meine maxi.
ist immer Verlass.“**

Therapie- und Arbeitsstuhl **maxi.** begleitet Amelie zuverlässig durch den Tag.

12
–
43

Sitzen + Positionieren.

44
–
71

Transport + Unterwegs.

72
–
119

Gehen + Fahren.

120
–
143

Stehen + Transfer.

144
–
165

Bad + Toilette.

166
–
173

Allgemeine Hinweise.



Ob Sitzen, Fahren, Gehen, Stehen – unsere Hilfen begleiten und unterstützen dich in deinem Alltag. Sie bringen dich mit deinen Freunden zusammen und fördern deine Entwicklung und Gesundheit. Jede Hilfe kann individuell an deinen Körper angepasst werden. Und an deinen Geschmack.

Inhalt.



Sitzen + Positionieren.



smilla.
16–19



madita.
20–23



madita-fun.
24–27



madita-fun mini.
28–31



maxi.
32–35



activity chair.
36–39



tina.
40–43

Transport + Unterwegs.



sascha.
48–51



marie integral.
52–55



charlie integral.
56–59



franka.
60–63



corzo xcountry go.
64–67



piper.
68–71

Gehen + Fahren.



malte.
76–79



malte outdoor.
80–81



marcy.
82–85



dynamic pacer.
86–89

72–119

Gehen + Fahren.**momo dreirad.**

90–93

**follow-me momo.**

94–97

**momo motion.**

98–101

**momo therapierad.**

102–107

**momo zubehör.**

108–111

**rifton dreirad.**

112–115

**mats.**

116–119

120–143

Stehen + Transfer.**trixi.**

124–125

neu

**till.**

126–131

**todd.**

132–135

**tim.**

136–139

**rifton stander. supine**

140–143

144–165

Bad + Toilette.**boris.**

148–151

**hts.**

152–155

**wave.**

156–159

**basti.**

160–163

**bibi.**

164–165

166–173

Allgemeine Hinweise.**Reinigung +
Desinfektion.**

168–169

**Stoff-Kollektion.**

170–173

**Namensstickerei.**

173

Legende.

Kurz und knapp erklärt.



Indoor



Outdoor



Nassbereich



PKW



max. Belastung



Winklereinstellung
der Mittelsäule



Rückenwinkel



Kantelung



Sitzhöhe



Sitzwinkel



Sitztiefe



Sitzbreite



Ellbogenhöhe



Griffhöhe



Schrittlänge



Körpergröße



Einstiegshöhe



GMFCS
Klassifizierung



Welche tollen Stoffe es für dein
Hilfsmittel gibt, erfährst du in
diesem Katalog.



Begurtungsmöglichkeiten
Damit du dich sicher fühlst und
gerade und aufrecht dein Hilfsmittel
nutzen kannst, gibt es viele unter-
schiedliche Begurtungsmöglichkei-
ten (siehe Preisliste).



Deine Sitzhilfe gehört zu dir, das soll jeder sehen. Deshalb kann die Rückeneinheit mit deinem Namen bestickt werden. Mehr Infos findest du in diesem Katalog.



Vielfältiges Zubehörprogramm zur optimalen Unterstützung & individuellen Ausstattung. Mehr Infos findest du in der Preisliste.

Unsere Icons helfen dabei, schnell herauszufinden, wie und wo man unsere Hilfen anwenden kann.

So lässt sich auf den ersten Blick erkennen, ob unsere Produkte für drinnen oder draußen geeignet sind oder wie man sie an die unterschiedlichen Körpermaße und individuellen Bedürfnisse einstellen kann.

Du hast die Wahl:

aus vielen tollen Stoffen, Gurten, Zubehör und Stickereien. Damit dein Hilfsmittel so individuell ist wie du!



**Hallo,
wir sind Miriam und Torsten Schuchmann. Wir
führen unseren Familienbetrieb in zweiter
Generation. Unser Unternehmen hat über 40 Jahre
Erfahrung, Kinder-Rehatechnik zu fertigen und zu
vertrieben.**

Was uns dabei am Herzen liegt: Kinder mit individuellen Bedürfnissen so optimal, wie es nur irgendwie möglich ist, zu unterstützen – mit Produkten, die genauso individuell sind wie sie.

Was uns bewegt.

Dass wir uns gerade in der Kinder-Rehatechnik stark machen, hat seinen Ursprung in unserer eigenen Familie. Denn wir wissen, was es heißt, einen mehrfach schwerstbehinderten Menschen zu begleiten.

Als Miriams Schwester klein war, steckte allerdings auch die Rehatechnik noch in den Kinderschuhen. Ihre Eltern wussten, was man verbessern musste, um ihrer Tochter die Teilhabe am Alltag zu ermöglichen. Die Geschäftsidee war geboren.

Was wir bewegen.

Unser Anspruch ist es, Kinder mit Behinderungen so zu unterstützen, dass sie mobiler und selbstständiger werden. Gleichzeitig geht unsere Aufgabe noch viel tiefer. Unser mittlerweile über 180-köpfiges Team arbeitet eng mit Fachhändler*innen, Ärzt*innen und Therapeut*innen zusammen, um uns genau in die Bedürfnisse des Kindes und deren Familien hineinzudenken.

Deshalb sind auch unsere Produkte mehr als nur Produkte. Sie werden zum Weggefährten fürs Leben. Daher wollen wir Bewegung in den Markt bringen – mit echten Innovationen in der Rehatechnik, die höchste Ansprüche an Funktionalität, Design und Sicherheit erfüllen.

Bei Fragen oder Anregungen zu allgemeinen Themen oder zu unseren Produkten stehen wir – und natürlich auch das gesamte Schuchmann-Team – Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

So findest du kinderleicht deine täglichen Begleiter.

GMFCS steht für eine Klassifizierung der grobmotorischen Fähigkeiten von Kindern und jungen Erwachsenen. Ärzte und Therapeuten verwenden das System, um den Grad der motorischen Beeinträchtigungen von Kindern mit Zerebralparese zu klassifizieren. Dabei werden fünf Stufen unterteilt, von Level 1 bis Level 5. Jedes Level definiert, wie und ob sich Kinder eigenständig bewegen können oder ob sie auf Hilfsmittel und Mobilitätshilfen angewiesen sind.

GMFCS zwischen dem 6. und 12. Geburtstag:

GMFCS Level I



Die Kinder können zu Hause, in der Schule, außerhalb und in der Umgebung frei gehen. Die Kinder können ohne zusätzliche körperliche Hilfe Bordsteine herauf- und hinabsteigen, sowie Treppensteigen ohne Festhalten am Geländer. Rennen und Hüpfen sind möglich, aber Geschwindigkeit, Gleichgewicht und Koordination sind eingeschränkt. Die Kinder können an körperlichen Aktivitäten und am Sport teilnehmen, abhängig von persönlichen Wünschen und Umweltbedingungen.

GMFCS Level II



Die Kinder gehen frei in den meisten Situationen, haben aber Schwierigkeiten bei langen Distanzen und auf unebenen Untergrund, bei Gefälle, bei Menschenmengen, beengten Wegen oder wenn sie einen Gegenstand tragen. Die Kinder können Treppen mit Festhalten am Geländer herauf- und hinabsteigen oder mit körperlicher Hilfe, wenn kein Geländer vorhanden ist. Außerhalb und in der Umgebung können sie mit körperlicher Unterstützung oder mit einer Gehhilfe gehen oder sie benutzen für längere Wege einen Rollstuhl. Rennen und Hüpfen sind bestenfalls eingeschränkt möglich. Die Einschränkungen in der Durchführung von körpermotorischen Aufgaben können Adaptionen nötig machen, die es ermöglichen an körperlichen Aktivitäten und am Sport teilzunehmen.

GMFCS Level III



Die Kinder können drinnen meistens mit einer Gehhilfe gehen. Wenn die Kinder hingesetzt werden, können sie einen Sitzgurt für Beckenaufrechterhaltung und Balance benötigen. Bei Übergängen vom Sitzen zum Stand und vom Boden zum Stand wird körperliche Hilfe von einer Person oder einer unterstützenden Oberfläche benötigt. Bei längeren Entfernungen benutzen die Kinder eine Form der rollenden Mobilität. Kinder können möglicherweise Treppen mit Festhalten am Geländer unter Aufsicht oder mit körperlicher Unterstützung hinauf- und hinabgehen. Die Einschränkungen des Gehens können Adaptionen notwendig werden lassen, die es erst ermöglichen an körperlichen Aktivitäten und Sport teilzunehmen, einschließlich eines Aktiv-Rollstuhls oder eines E-Rollstuhls.

GMFCS Level IV



Die Kinder benutzen Fortbewegungsmethoden, die in den meisten Fällen körperliche Unterstützung oder elektrische Mobilität beinhalten. Die Kinder benötigen angepasste Sitzvorrichtungen für Rumpf- und Beckenkontrolle; auch für die meisten Transfers wird körperliche Unterstützung benötigt. Zu Hause bewegen sich die Kinder am Boden fort (rollen, kriechen oder krabbeln), gehen kurze Strecken mit körperlicher Unterstützung oder benutzen elektrische Mobilität. Wenn die Kinder in den Stand gebracht werden, können sie zu Hause oder in der Schule einen Rollator benutzen. In der Schule, draußen und in der Umgebung werden die Kinder in einem Aktiv-Rollstuhl geschoben oder sie benutzen einen E-Rollstuhl. Durch Einschränkungen in der Fortbewegung werden Anpassungen benötigt, die es erst ermöglichen an körperlichen Aktivitäten oder am Sport teilzunehmen, einschließlich körperlicher Unterstützung und / oder elektrischer Mobilität.

GMFCS Level V



Die Kinder werden in allen Situationen in einem Rollstuhl transportiert. Die Kinder sind in ihrer Möglichkeit, Kopf und Rumpf entgegen der Schwerkraft aufrecht zu halten sowie bei Arm- und Beinbewegungen eingeschränkt. Unterstützende Technologien werden benutzt, um Kopfaufrechterhaltung, Sitz, Stand und / oder Mobilität zu verbessern, aber die bestehenden Einschränkungen können nicht durch die zusätzlich angewendeten Hilfsmittel kompensiert werden. Transfers benötigen die körperliche Unterstützung eines Erwachsenen. Zu Hause können die Kinder kurze Entfernungen auf dem Boden zurücklegen oder werden von einem Erwachsenen getragen. Die Kinder können sich u.U. selbstständig mit einem E-Rollstuhl mit umfangreicher Adaptation der Sitzposition und der Steuerung fortbewegen. Die Einschränkungen in der Mobilität machen Anpassungen nötig, um an körperlichen Aktivitäten und am Sport teilzunehmen, einschließlich körperlicher Unterstützung und das Benutzen elektrischer Mobilität.

GMFCS

Wir haben jedem unserer Produkte die passenden GMFCS-Level zugeordnet. Das soll helfen, das richtige Hilfsmittel für die Bedürfnisse des Kindes auszuwählen. Die Einordnung dient lediglich als Orientierung und kann von Kind zu Kind abweichen.



Sitzen + Positionieren.



Gemeinsam kochen – schmeckt fantastisch.



Leah liebt es, mit ihrem Papa zu kochen.
Gut positioniert in ihrer **madita-fun.**, schneidet sich das
frische Obst und Gemüse fast von allein. Mit ein wenig
Hilfe von Leah! Gut, dass **madita-fun.** sich ganz leicht
auf Arbeitshöhe einstellen lässt.

Sitzen + Positionieren.



Nach der Schule hilft Leah gerne beim Kochen. Perfekt positioniert in ihrer madita-fun. gelingt es Leah leicht, Obst und Gemüse zu zerteilen. Ihr Therapiestuhl hilft dabei, die bestmögliche Haltung einzunehmen. Das Sitzen in der richtigen Position ist wichtig, damit sich Leahs Knochen und Muskeln gut entwickeln können.

Das tagtägliche Sitzen ist eine Grundhaltung des Menschen, die bei Kindern mit Beeinträchtigungen sogar eine noch größere Bedeutung hat.

Eine korrekte Sitzhaltung ist daher sehr wichtig, um Deformationen vorzubeugen. Schon bei den Kleinsten sollte man darauf achten, dass Wirbelsäule, Becken und Hüfte keine Schäden durch Fehlhaltungen nehmen.

Die richtige Sitzhilfe, die individuell angepasst werden kann, verhindert nicht nur Fehlstellungen – sie macht Kindern das Sitzen so angenehm wie möglich. Übrigens: die bestmögliche Sitzposition wirkt sich nicht nur positiv auf die Rückengesundheit, sondern auch auf Verdauung und Atmung aus. Auch wird man nicht so schnell müde und ganz wichtig: Kinder können am Alltag teilnehmen, zusammen mit Freunden spielen oder andere Aktivitäten unternehmen. Das entlastet auch Eltern, Erzieher und Lehrer.

Sitzend die Welt entdecken

In der sitzenden Position können bereits die Kleinsten ihre Umgebung entdecken. Um die Haltearbeit müssen sie sich keine Sorgen machen. Jede Sitzhilfe gibt die nötige Sicherheit und die Hände bleiben frei zum Spielen. Die größtmögliche Bewegungsfreiheit schafft man mit einem abnehmbaren Rücken. Die Freiheit, die dem Kind im oberen Bereich des Rückens gegeben wird,

motiviert, sich aufzurichten und aktiv zu sein. Kinder sollten aber niemals über längere Zeit in derselben Position verharren. Unsere Sitzhilfen bieten daher viele Möglichkeiten, die Position variabel zu verändern. So kann der Sitz zum Beispiel nach vorne oder hinten geneigt werden. Es gibt auch Hilfen, die ein dynamisches Sitzen ermöglichen: Hier wippt der Rücken mit der Bewegung des Kindes mit. Das baut physische und psychische Spannungen ab.

Uns ist es wichtig, alle Sitzhilfen auf die Bedürfnisse von Kind, Eltern und Therapeuten zuzuschneiden. So sind sie variabel einsetzbar, leicht zu handhaben und bieten unterschiedlichste Funktionen, damit sich Kinder wohlfühlen. Und das nicht nur beim Sitzen, sondern auch im Liegen. Deshalb führen wir auch ein Liegeschalensystem für Kinder, die unter extremen Kontraktionen und Druckempfindlichkeiten leiden. In diesem mobilen Liegesystem fühlen sich die Kleinen wohl, sie können entspannen und für kurze Zeit in eine Sitzposition gebracht werden.

Sitzen + Positionieren.



smilla.
16–19



madita.
20–23



madita-fun.
24–27



madita-fun mini.
28–31



maxi.
32–35



activity chair.
36–39



tina.
40–43

GMFCS
Level I-III



Ich bin deine Sitzhilfe für den Alltag.

Ich fördere das aktive Sitzen und unterstütze so deine Entwicklung. Das Tolle ist, egal wie groß du gerade bist, ich wachse mit dir mit! Damit du mit deinem großen Bruder gemütlich am Tisch sitzen kannst, kann man meine Sitz- und Fußplatte ganz einfach nach oben und unten, nach vorne und hinten verändern. Ich wurde mit viel Liebe zum Detail aus Holz gefertigt. Wie toll passe ich da zu den anderen Möbeln in deinem Zuhause! Mit meinen vielen Zubehörteilen kann ich spielend leicht noch individueller an deine Bedürfnisse angepasst werden.



Du entscheidest, wie ich aussehen soll. Kombiniere meinen Rahmen in Buche natur, weiß lackiert oder Schiefer-Grau mit einer Auswahl toller farbiger Bezüge!



Höhenverstellung leicht gemacht!

Einfach Knopf drücken und Sitz- und Fußplatte können nach oben oder unten bewegt werden.

neu

Neue Armlehnen!

Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff und damit elefantenstark.



Kopfstütze

unterstützt die Kopfkontrolle.

Rückenlehne

ist in Höhe und im Winkel veränderbar.

Armlehnen

sind in der Höhe einstellbar.

Sitzplatte

kann in Höhe, Tiefe und im Winkel angepasst werden.

Standfuß

mit Kunststoffgleitern.

abnehmbarer Polsterbezug
aus atmungsaktivem Stoff.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Oberschenkelführung
bietet nötigen Halt.

Holzrahmen

mit integrierten Alu-Profilen.

Fußplatte

kann in Höhe, Tiefe und im Winkel angepasst werden.

Schnelle Höhenverstellung

über die in den Rahmen integrierten Aluminiumprofile.

**Rahmenfarben**

- Buche natur
- Buche weiß
- Buche Schiefer-Grau



		Gr. 0 KITA	Gr. 0	Gr. 1 KITA	Gr. 1	Gr. 2
Sitzbreite		17 - 28 cm		20 - 35 cm		30 - 40 cm
Sitztiefe		16 - 26 cm		25 - 35 cm		30 - 40 cm
Sitzhöhe max.		42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
Rückenhöhe*		25 cm		29 cm		34 cm
Rückenwinkel		(-) 3° - 17,5°				
Sitzwinkel		(-) 5° - 15°				
Fußbankschnellhöhenverstellung min.**	Standard	12 cm				
	mit 50 mm Doppellaufrolle	17 cm				
	mit 75 mm Doppellaufrolle	20 cm				
Höhe der Fußbank bodentief min.**	Standard	2,5 cm				
	mit 50 mm Doppellaufrolle	7,5 cm				
	mit 75 mm Doppellaufrolle	10,5 cm				
Höhe Unterschenkellänge bei schnellhöhenverstellbarer Fußbank min.		14 cm				
Höhe Unterschenkellänge bei bodentiefer Fußbank min.		18,6 cm				
Breite gesamt		46 cm	47 cm	53 cm	54 cm	59 cm
Länge Grundrahmen		63 cm	69 cm***	63 cm	69 cm***	69 cm***
max. Belastung		30 kg		45 kg		60 kg
Gewicht		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg
HMV-Nr.		26.11.05.0034				
* minimale Rückenlänge gemessen von Sitzfläche zu Oberkante Rücken ** einstellbare Unterschenkellänge max. = gewählte / benötigte Sitzhöhe - Fußbankhöhe min. *** mit langem Standfuß + 10 cm						



Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien, Zubehör und Begutungen findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.



GMFCS
Level III-V



Ich bin dein mitwachsender Therapiestuhl.

Ich finde es richtig schön, dich als Kleinkind oder Jugendlicher zu begleiten. Darum gibt es mich in vier Größen. Das Tolle ist, dass sich mein Sitz nach vorne und hinten kippen lässt – das geht ganz leicht mit einem Hebel. Und sogar so weit, dass du dich hinlegen und entspannen kannst. Damit du immer mitten im Geschehen bist, lasse ich mich hoch und runter fahren. Ich helfe dir auch dabei, deine Rückenmuskulatur zu trainieren: Dazu nimmt man einfach ganz fix meine Rückenlehne ab.





Rückeneinheit

optional auch abnehmbar, kann im Winkel und in der Höhe eingestellt werden.

Kopfstütze

ist in Höhe, Tiefe und im Winkel einstellbar.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Therapietisch

bietet viel Platz für Aktivitäten.

Sitzfläche

ist individuell anpassbar.

Beckengurt

gibt die nötige Sicherheit.

Grundgestell

ist standsicher und kompakt gefertigt.

Fußpedal

für die Höhenverstellung.

Fußbank

für eine gute Positionierung der Füße.

Laufrollen

in verschiedenen Größen erhältlich, erleichtern den Transfer.

**Mit einem Handgriff:
Wenn du möchtest, kann mein
Rücken ganz einfach abgenommen
werden. Das bietet dir mehr
Freiheit, dich zu bewegen.**



Rahmenfarben  Anthrazitgrau

 Telegrau 4 (Weißgrau)



Meine Kopfstütze mit winkelverstellbarer Seitenführung ist flexibel, anpassbar, praktisch und bietet einen großen therapeutischen Nutzen.

Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
Sitztiefe*	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Sitzbreite	16 - 26 cm	20 - 30 cm		28 - 38 cm
Rückenhöhe mit extra kurzem Rücken	32 - 35 cm		35 - 43 cm	
Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 - 43 cm		42 - 52 cm	
Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52 cm		53 - 63 cm	
Rückenhöhe mit Aktiv-Rücken	35 - 43 cm			42 - 52 cm
Sitzhöhe	47,5 - 58 cm			
Unterschenkelänge	12 - 22 cm** / 15 - 25 cm	16 - 29 cm** / 19 - 32 cm	19 - 33 cm** / 22 - 36 cm	25 - 43 cm
Breite gesamt	45 cm		53 cm	
Länge Grundrahmen	66 cm		77 cm	
Sitzwinkel	(-)5° – 37°			
Rückenwinkel	(-)5° – 25°			
max. Belastung	30 kg		45 kg	50 kg
Gewicht	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg
HMV-Nr	26.11.05.0021			
* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert				
** dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden				



Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien, Zubehör und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-V



Ich bin dein integrativer Therapiestuhl.

Ob am Frühstückstisch oder in der Spielecke, ich bringe dich auf Augenhöhe mit deinem Gegenüber. Ich fahre dich nach oben und unten. Spielend leicht durch die Unterstützung mittels Gasdruckfedern. Per Hebel neige ich mich nach vorne oder hinten. Dabei kann ich an deinen Körper angepasst werden. Und an deinen Geschmack: Mich gibt's in vielen tollen Farben. Wusstest du schon, dass meine Rückenlehne abgenommen werden kann? Das trainiert deine Rückenmuskulatur und verhilft dir zu mehr Aufrichtung.





Schiebegriff

für einen leichten Transfer.

Rückeneinheit

optional auch abnehmbar, kann im Winkel und in der Höhe eingestellt werden.

Kopfstütze

ist in Höhe, Tiefe und im Winkel einstellbar.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Armlehnen

sind individuell anpassbar.

Sitzfläche

ist individuell anpassbar.

Fußbank

in drei Varianten erhältlich:

- ohne Feststellung
- mit Feststellung
- mit stufenloser Winkelverstellung

Grundgestell

ist kompakt und standsicher gefertigt.

Laufrollen

in verschiedenen Größen erhältlich, erleichtern den Transfer.

**Mit einem Handgriff:
Wenn du möchtest, kann mein
Rücken ganz einfach abgenommen
werden. Das bietet dir mehr
Freiheit, dich zu bewegen.**



Rahmenfarben  Anthrazitgrau

 Telegrau 4 (Weißgrau)



Meine Kopfstütze mit winkelverstellbarer Seitenführung ist flexibel, anpassbar, praktisch und bietet einen großen therapeutischen Nutzen.

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
Sitztiefe*	15 – 25 cm	21 – 30 cm	26 – 36 cm	30 – 42 cm
Sitzbreite	16 – 26 cm	20 – 30 cm		28 – 38 cm
Rückenhöhe mit extra kurzem Rücken	32 – 35 cm		35 – 43 cm	
Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 – 43 cm		42 – 52 cm	
Rückenhöhe mit langem Rücken	42 – 52 cm		53 – 63 cm	
Rückenhöhe mit Aktiv-Rücken	35 – 43 cm			42 – 52 cm
Sitzhöhe	25 – 62 cm			
Sitzhöhe m. elektr. Höhenverst.	32 – 62 cm			
Sitzhöhe m. hydr. Höhenverst.	27 – 63 cm			
Unterschenkellänge	12 – 22 cm** / 15 – 25 cm	16 – 29 cm** / 19 – 32 cm	19 – 33 cm** / 22 – 36 cm	25 – 43 cm
Breite gesamt	54 cm		64 cm	
Breite gesamt mit Kombiuntergestell	66 cm		76 cm	
Länge Grundrahmen	61 cm		75 cm	
Länge Gesamt mit Kombiuntergestell	76 cm		86 cm	
Sitzwinkel	(-) 8° – 37°			
Rückenwinkel	(-) 5° – 25°			
max. Belastung	30 kg		45 kg	50 kg
Gewicht	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg
HMV-Nr.	26.11.05.0022			
* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert ** dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden				

* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert | ** dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden



Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien, Zubehör und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-V

Ich bin dein Therapiestuhl in jungen Jahren.

Und schenke dir Sicherheit von Anfang an. Ich bringe dich auf Augenhöhe mit deinen Freunden. Denn mein gemütlicher Sitz kann ganz leicht in der Höhe verändert werden, damit jede Tischhöhe für dich die passende ist und du danach wieder auf Spielhöhe abgesenkt werden kannst. Mein optional erhältlicher Dysplasie-Sitz ermöglicht dir richtig zu sitzen, sodass sich deine Hüftgelenke positiv entwickeln können. Zudem biete ich dir eine schmale oder breite Rückenform.





Schiebegriff

erleichtert den Transfer.

Armlehnen

können in Höhe und Breite angepasst werden.

Beckengurt

gibt die nötige Sicherheit.

Kopfstütze

gibt es als dreidimensional einstellbare oder höheninstellbare Variante.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Sitz

sorgt für eine optimale Entwicklung des Hüftgelenks.

Fußbank

ist gepolstert.

Sitzhöhe

kann mit Unterstützung einer Gasdruckfeder angepasst werden.

Laufrollen

erleichtern den Transfer.

So individuell wie du: Neben einem Standard-Sitzpolster kannst du dir auch ein Polster mit anatomischer Beinführung oder einen Dysplasie-Sitz aussuchen.



**Ideal für die
Erstversorgung.**



Daten	madita-fun mini.
Sitztiefe	12 - 19 cm
Sitzbreite	14 - 22 cm
Höhe kurzer Rücken	28 - 33 cm
Höhe langer Rücken	30 - 35 cm
Sitzhöhe	25 - 62 cm
Unterschenkellänge	12 - 22 cm
Breite gesamt	52 cm
Länge Grundrahmen	58 cm
Sitzwinkel	(-)5° - 37° / 0° - 42°
Rückenwinkel	(-)5° - 25°
max. Belastung	20 kg
Gewicht	16 kg
HMV-Nr.	26.11.05.0022



**Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien,
Zubehör und Begurtungen**
findest du in der Preisliste.



GMFCS
Level III-Vkg
max. 125

(-) 5° - 25°

(-) 20° - 20°

30 - 55 cm

40 - 55 cm

28 - 48 cm

**Ich bin dein souveräner Therapiestuhl.**

Ich bin deine tägliche Begleiterin bei Schularbeiten oder Lesestunden: Ich Sorge dafür, dass du immer optimal sitzt. Mein dezentes Aussehen unterscheidet mich kaum von den Alltagsstühlen deiner Freunde. Mit mir bist du immer optimal positioniert und kannst deine Aufmerksamkeit ganz deiner Arbeit widmen. Da meine Mittelsäule und mein verlängerter Radstand eine hohe Stabilität garantieren, bin ich großen Belastungen gewachsen.

neu



**Neue werkzeuglos
einstellbare Variante**
für Kopfstütze, Thoraxpelotten
und Kniewinkel.



Neue Größe
ab sofort bieten wir **maxi.**
auch in Größe 1b an.



Richtungsfeststeller vorne
sind nun im Standard enthalten
und stabilisieren den
Geradeauslauf.



Kopfstütze

ist gepolstert und höhen- sowie winkelverstellbar.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Armlehnen

sind breiten-, höhen- und tiefenverstellbar und auch abklappbar erhältlich.

Sitz

ist anatomisch geformt für eine komfortable Sitzposition.

Grundgestell

ist kompakt und robust gefertigt.

Rückeneinheit

ist besonders stabil und hält hohen Belastungen stand.

Einstellbare Beckenführung

für eine optimale Positionierung.

Elektromotor mit Handbedienung

für die elektrische Verstellung von Höhe sowie Sitz- und Rückenwinkel.

Laufrollen

haben einen Durchmesser von 100 mm und sind hinten mit zwei Feststellern ausgestattet.

**Hohe Sicherheit**

durch solides und standfestes Untergestell.

**Strapazierfähiger Bezug**

in modernen Farben mit ausgezeichnete Qualität.

**Fußbank**

lässt sich in Höhe und Kniewinkel verstellen und ist fest an der Sitzeinheit montiert.





neu

Daten	Gr.1	Gr.1b	Gr.2	Gr.3
Sitztiefe	30 - 42 cm	38 - 48 cm		45 - 55 cm
Sitzbreite	28 - 38 cm		36 - 48 cm	
Rückenhöhe kurz	42 - 60 cm		48 - 60 cm	
Rückenhöhe lang	52 - 70 cm		58 - 70 cm	
Sitzhöhe	40 - 55 cm			
Unterschenkellänge	27 - 45 cm		35 - 52 cm	
Breite gesamt	60,5 cm			
Länge Grundrahmen	84,5 cm			
Sitzwinkel	(-)20° - 20°			
Rückenwinkel	(-)5° - 25°			
max. Belastung	125 kg			
Gewicht	45 kg			
HMV - Nr.	26.11.05.0051			

maxi. bietet mehr Selbstständigkeit dank elektrischer Verstellmöglichkeit der Höhe und Tiefe sowie vom Winkel für Sitz und Rücken.



Weitere Infos zu Stoffen, Zubehör und Begurtungen
findest du in der Preisliste.



GMFCS
Level II-IV



Ich bin dein dynamischer Therapiestuhl.

Stillsitzen finde ich absolut langweilig! Viel lieber lasse ich mich in alle Positionen verändern. Ich neige mich nach vorne und hinten, nach oben und unten – so dynamisch, wie du es brauchst. Das aktive Sitzen hat einen großen Vorteil: Es hilft dir dabei, physische und psychische Spannungen abzubauen. Mein zahlreiches Zubehör, wie Kopfstützen, Pelotten oder Seitenführungen, sorgt für die nötige Stabilität in jeder Situation.





activity chair.

Schiebegriff

für einen angenehmen Transfer.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Brustschultergurt

bietet Sicherheit und Bewegungsfreiheit.

Sitzhose

positioniert das Becken und fördert die korrekte Ausrichtung der Wirbelsäule.

Sandalen mit Fußriemen

können für eine optimale Körperausrichtung der Fußposition des Anwenders angepasst werden.

Doppelaufrollen mit Feststeller

erleichtern den Transfer.

Kopfstütze

lässt sich in der Höhe, Tiefe und im Winkel verändern.

Rückenwinkel

kann mithilfe einer Gasdruckfeder eingestellt werden.

Armlehnen

in Höhe und im Winkel einstellbar.

Sitzpolster

sind bequem und vermeiden Druckstellen.

Untergestell

ist besonders standsicher und in der Höhe einstellbar.

Fußbank

kann inkl. Wadenanlage nach hinten weggeklappt werden und ist daher ideal für den selbstständigen Transfer.

Optionale Dynamikfunktion

fängt deine Bewegungen sanft ab und ist ganz einfach und ohne Werkzeug per Drehgriff ein- und ausschaltbar.



Rahmenfarbe



Effektschwarz



Daten		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Sitztiefe		20 - 30 cm	28 - 41 cm	38 - 51 cm
Sitzbreite		30 cm	36 cm	43 cm
Sitzbreite (mit Hüftpelotten)		18 - 23 cm	22 - 29 cm	28 - 36 cm
Brustbreite		17 - 29 cm	17 - 30 cm	24 - 36 cm
Rückenhöhe		32 - 39 cm	39 - 48 cm	48 - 61 cm
Höhe Kopfstütze - Sitz		37 - 53 cm	44 - 62 cm	50 - 75 cm
Höhe Armlehne - Sitz		13 - 19 cm	18 - 27 cm	18 - 27 cm
Unterschenkelänge		18 - 30 cm	20 - 38 cm	29 - 54 cm
Sitzhöhe über dem Boden	mit kurzen / mit langen Standfüßen	24 - 32 cm / 47 - 55 cm	32 - 42 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	mit kurzen / mit langen Standfüßen und Doppelaufrollen	34 - 42 cm / 47 - 55 cm	41 - 51 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	mit Hi / Lo-Untergestell	25,5 - 63,5 cm	30,5 - 58,5 cm	40,5 - 61 cm
Rahmenbreite	mit kurzen / mit langen Standfüßen	53 / 58 cm	59 / 62 cm	68 / 68 cm
	mit kurzen / mit langen Standfüßen und Doppelaufrollen	57 / 60 cm	62 / 65 cm	71 / 71 cm
	mit Hi / Lo-Untergestell	66 cm	68,5 cm	73,5 cm
Sitzwinkel		(-) 15° - 15° / (-) 15° - 25°		
Rückenwinkel		(-) 5° - 20°		
Gesamtlänge / Rahmentiefe		54-73 cm	57-73 cm	77-90 cm
Gesamtbreite		53-60 cm	59-65 cm	68-70,5 cm
Gesamthöhe inkl. Kopfstütze		61-108 cm	76-120 cm	92-136 cm
Gesamthöhe ohne Kopfstütze		56-94 cm	71-106 cm	90-122 cm
Empfohlene Körpergröße		81-122 cm	102-142 cm	127-188 cm
max. Belastung		34 kg	68 kg	113 kg
Eigengewicht Standard-Untergestell		12,2 kg	15,9 kg	24,5 kg
Eigengewicht Hi / Lo-Untergestell		25,4 Kg	39 Kg	44,5 kg
HMV-Nr. Standard-Untergestell		26.11.05.0046		
HMV-Nr. Hi / Lo-Untergestell		26.11.05.0047		

Die angegebenen Maße gelten für beide Sitzeinheiten mit allen Untergestellen. Falls sich bestimmte Maße zwischen den Untergestellen unterscheiden, sind diese konkret aufgeführt.



Weitere Infos zu Zubehör und Begurtungen findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.



GMFCS
Level IV-V



Ich bin dein modulares Liegeschalensystem.

Und ich mache es dir so komfortabel, wie es nur geht. Dank Vakuummatratze mit elektrischer Pumpe liegst du bei mir druckfrei ohne Schmerzen. Ich bin richtig dynamisch, denn nicht nur meine Liegefläche kann in der Höhe elektrisch verändert werden, sondern auch der Sitz-, Rücken- und Kniewinkel. So kannst du sogar sitzend die Welt entdecken! Wusstest du, dass ich flexible Lenkräder habe und leicht zu wenden und zu schieben bin? So kannst du bei jedem Spaziergang dabei sein.





Schiebebügel

lässt sich in
Höhe und Länge verstellen.

Lagerungsmatratze
ist konturierbar.

Abklappbarer Rausfallschutz
für optimalen Schutz und Sicherheit.

Elektromotor

für die elektrische Verstellung von

- Höhe
- Sitz-, Rücken- und Kniewinkel
- Sitzkantelung

Liegeschalenuntergestell

ist dynamisch verstellbar.

Flexible Lenkräder

erleichtern das Schieben im
Innen- und Außenbereich.

**Auf mir kannst du nicht nur liegen,
sondern auch ganz bequem sitzen.
Damit du die Welt um dich herum
immer im Blick hast.**



Rahmenfarbe



Weiß-Blau

Befestigungsösen
für den Transport im Auto.



Elektrische Pumpe
für die Vakuummatratze.



Daten tina.	dreiteiliges Liegeschalensystem
Höhe Liegeschalenaufnahme vom Boden	53 - 79 cm
Rückenwinkel verstellbar	130° - 180°
Sitzwinkel verstellbar	0° - 40°
Kniewinkel verstellbar	110° - 180°
Breite Grundgestell	64 cm
max. Belastung	100 kg
Gewicht	70 kg



Daten Liegeschalensystem	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Breite	59 cm (mit Rausfallschutz + 12 cm)		
Länge Kopfteil	60 cm	75 cm	90 cm
Länge Sitzteil	35 - 50 cm		
Länge Beinteil	45 cm	55 cm	65 cm
Länge gesamt	140 - 155 cm	165 - 180 cm	190 - 205 cm
Höhe	6 cm (mit Rausfallschutz + 9 cm)		



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



Annelie liebt die Ausflüge mit ihrer Familie. Heute geht es gemeinsam auf den Spielplatz!

In ihrer **marie integral.** ist sie dabei bestens geschützt und gestützt.

Auch mit unseren anderen Transporthilfen bleibst du immer in Bewegung und kommst sicher an dein Ziel.

Abenteuer voraus!





Endlich mit ihren Eltern im Sand buddeln. Darauf freut sich Annelie heute am meisten. Die Fahrt zum Spielplatz verbringt sie relaxed in ihrem marie integral. Autositz. Gemeinsam baut die Familie eine tolle Burg! Auf der Rückfahrt hält Annelie ein Nickerchen. Und auch Mama und Papa sind entspannt, denn ihre Tochter wissen sie bestens geschützt und gestützt.

Mobil zu sein, ist für Kinder mit Behinderung und auch deren Eltern ein wichtiger Aspekt im Leben. Mobilität steigert nicht nur die Lebensqualität, sie sichert auch soziale Kontakte. Transporthilfsmittel wie Autositze, Reha-Wagen oder Untergestelle sorgen dafür, dass Kinder sicher zur Schule oder in den Kindergarten kommen. Sie können ihre Freunde oder Großeltern besuchen. Oder auch mal einen Ausflug ins Grüne unternehmen.

Unsere speziell ausgerüsteten Reha-Autositze beispielsweise erleichtern Eltern oder Begleitpersonen, Kinder sicher und gut positioniert von A nach B zu bringen. Sie erfüllen alle relevanten Richtlinien und sind von unabhängigen Testinstituten geprüft. Auf Nummer sicher fährt man mit der richtigen Begurtung und dem Side Impact Buddy. Aber nicht nur die Sicherheit, auch das Wohlbefinden der Kinder und die einfache Handhabung spielen für uns eine große Rolle.

Richtig sitzen, richtig wohlfühlen

Kinder sollten während der Fahrt so bequem wie möglich sitzen. Den Rücken in der Höhe verändern, den Sitz nach vorne und nach hinten neigen – alles kann auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden. Jegliche Änderungen funktionieren meist spielend leicht und mit nur wenigen Handgriffen. Für spezielle Anforderungen gibt es unsere Untergestelle, die unter individuellen Sitzschalen Platz finden. Je nach Ausstattung und Laufrollen bzw. -rädern sind Kinder damit für In- oder Outdoor-Abenteuer bestens gewappnet.

Die richtige Positionierung im Sitz ist das A und O. Kinder sitzen stabil, wenn Becken, Oberschenkel und Füße den nötigen Halt haben. Für das Gleichgewicht ist es wichtig, Rumpf, Schulter und Kopf richtig zu positionieren. Und je mehr Bewegungsfreiheit Kopf, Armen und Händen gegeben wird, desto aktiver kann das Kind agieren. All diese Dinge können mit dem passenden Zubehör und den vielfältigen Einstellungen sichergestellt werden. Sollte das Zubehör oder die handelsübliche Ausstattung einmal nicht ausreichen, gibt es Hilfsmittel, die Modifikationen ermöglichen.

Transport + Unterwegs.



sascha.
48–51



marie integral.
52–55



charlie integral.
56–59



franka.
60–63



corzo xcountryp.
64–67



piper.
68–71

GMFCS
Level III-V



Ich bin dein schwenkbarer Autositz.

Ich liebe Autofahren. Du auch? Dann nimm mich einfach mit. Mit mir kommst du überall sicher an. Denn ich wurde geprüft und als absolut sicher empfunden – auf dem Beifahrersitz wie auf der Rücksitzbank. Damit es deinen Eltern ganz leichtfällt, dich auf meinen Sitz zu positionieren, kann man mich kinderleicht um 90 Grad aus dem Auto herausdrehen. Mein absolutes Highlight: Ich kann als Basis für Modifikationen genutzt werden. So kann ich ganz nach deinen Bedürfnissen ausgestattet werden. Das macht mir so schnell keiner nach.



Mit tollem
Zubehör!



Sitzbezug
ist abnehmbar.

Thoraxpelotten
ermöglichen eine stabile und
aufrechte Sitzposition.

Rücken
lässt sich in drei Stufen neigen.

Schwenkvorrichtung
lässt sich bis 90° drehen.

gepolsterte Kopfstütze
kann in der Höhe verändert werden.

Gurte
dienen der Stützung und Positionierung.

Anatomische Seitenpolster
bewirken eine Aufrichtung des Körpers.

Fußbank
ist in der Höhe einstellbar und
für den Transfer abnehmbar.

90°

Schwenkvorrichtung
erleichtert den Transfer.

**Abnehmbare
Pelotten**



Daten	Gr. 1		Gr. 2		Gr. 3	
	a	b	a	b	a	b
Sitztiefe	25 cm	30 cm		35 cm		40 cm
Sitzbreite	28 cm		32 cm		36 cm	
Rückenhöhe	40 cm		48 cm		56 cm	
Kopfstützenhöhe	59 - 69 cm		65 - 77 cm		76 - 86 cm	
Pelottenhöhe	25 - 33 cm		32 - 40 cm		36 - 44 cm	
Sitzwinkel*	0° / 15°		0° / 10°			
Brustbreite	14 - 25 cm		16 - 29 cm		16 - 32 cm	
Rückenwinkel	90° - 108°					
max. Belastung	30 kg		45 kg		60 kg	
HMV-Nr.	26.11.06.0009					

* bei Verwendung der Fußbank und Schrägverstellung



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



GMFCS
Level III-V

kg
max. 16,5



61-105 cm

43 cm

61 cm

360°

34,5°-74,5°



ECE R129/03
ZERTIFIZIERT

i-size
universal
ISOFIX

Ich bin deine sichere Begleiterin für unterwegs.

Und die beste Gefährtin für entspannte Reisen. Mit meinem ergonomischen Sitz kannst du auch bei langen Fahrten ganz bequem sitzen oder liegen. Zusätzlich sorgt meine einzigartige EPP-Schalenstruktur für einen verbesserten Aufprallschutz. In Kombination mit dem Side Impact Buddy, der bis zu 40 % der Energie aus einem Aufprall absorbiert, bist du optimal geschützt. Damit wir möglichst lange gemeinsame Autoreisen erleben können, kannst du mich entgegen der Fahrtrichtung oder in Fahrtrichtung einbauen. Dabei ist meine Installation auf dem Rücksitz dank der Isofix-Funktion ein Kinderspiel! Deine Eltern freuen sich garantiert über meine 360-Grad-Drehung! Damit können sie mich ganz einfach drehen, wenn sie dich rein- oder rausheben.





Die EPP-Schalenstruktur
des Sitzes bietet einen
verbesserten Aufprallschutz.

Thoraxpelotten
sind in der Breite anpassbar.

Isofix-Halterung
für eine Nutzung in
beide Fahrtrichtungen.

360° Rotation
für komfortables
Hineinsetzen & Herausheben.

Kopfstütze
kann in der Höhe verändert werden.

Mit dem 5-Punkt-Gurt
bleibt dein Kind sicher an seinem Platz.

Abduktionskeil
ermöglicht einen optimalen Halt.

Verstellbarer Neigungswinkel
für 4 verschiedene Sitz- und Liegepositionen.

Fußbank
zur Entlastung der Beine,
des Rückens und des Nackens.

Höhenverstellung der Fußbank
so wächst der Autositz problemlos mit.

**Mit Blick
entgegen der
Fahrtrichtung.**

**Mit Blick in
Fahrtrichtung.**


**Komfortables
Ein- und
Aussteigen.**

**0 bis
16,5 kg**



**9 bis
16,5 kg**



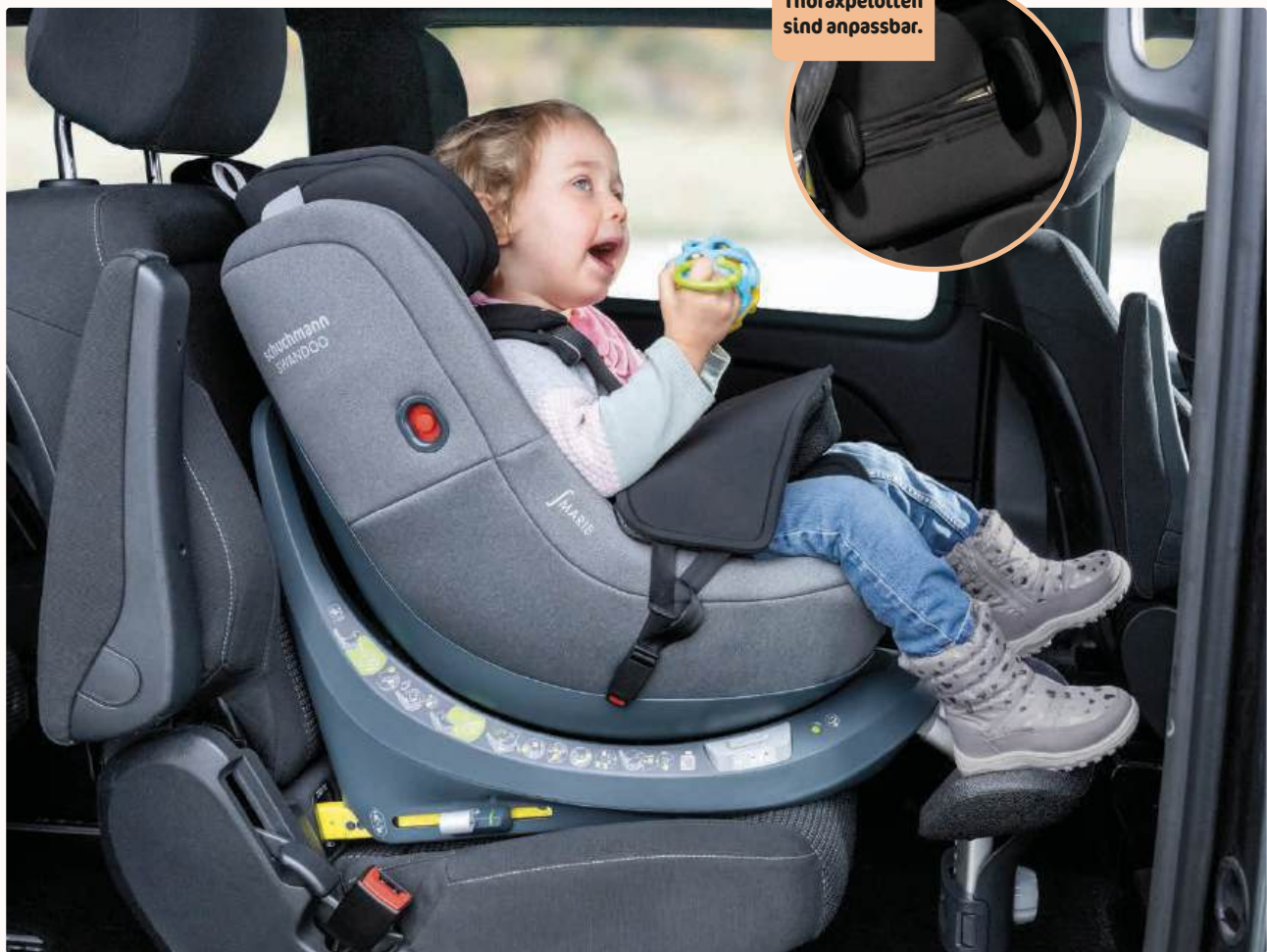

Daten	marie integral.
Empf. Körpergröße	61-105 cm
Länge	76 cm
Breite	43 cm
Höhe	61 cm
Sitzhöhe	12,5 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)
Sitztiefe	28 cm
Sitzbreite	28 cm
Armlehnenhöhe	34 cm
Rückenhöhe	Max. 41 cm
Rückenlehnenwinkel	Rückwärtsgerichtet: 34,5°-49,5°; Vorwärtsgerichtet: 59,5°- 74,5° gemessen zu horizontaler Ebene.
Kopfstützenhöhe	19 cm
Höhe Fußstütze / Fußbank	-2 cm bis + 16 cm zur horizontalen Fläche
Gewicht	15,6 kg
Max. Belastbarkeit	16,5 kg
Befestigung der Sicherung	5-Punkt-Gurt
HMV-Nr.	26.11.06.0035



**Optionaler Abduktionskeil
dient zur besseren
Positionierung der Beine.**



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-V



Ich bin dein cooler Autositz bis ins Teenageralter.

Und ich bin dein Begleiter für spannende Fahrten und helfe dir zu mehr Selbstständigkeit. Meine Bedienung ist nämlich einfach und intuitiv, damit du schnell und einfach lernen kannst, dich ohne Hilfe anzuschnallen. Das stärkt nicht nur für mehr Selbstvertrauen, sondern verhindert bei dir auch die unentspannten Anschnallversuche deiner Eltern! Meine einzigartige EPP-Schalenstruktur sorgt für einen verbesserten Aufprallschutz. In Kombination mit dem Side Impact Buddy, der bis zu 40% der Energie aus einem Aufprall absorbiert, bist du auf deinen Reisen optimal geschützt.


NEU:
jetzt mit
HMV-Nr.



Variante mit
Beckengurt mit
Beckenführungs-
pelotte.



Variante mit
5-Punkt-Gurt.

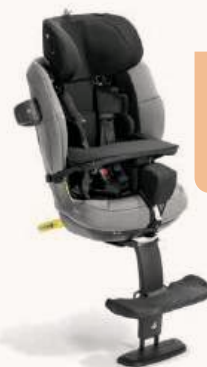

Variante mit
5-Punkt-Gurt mit
Armauflage &
Abduktionskeil.



charlie integral.

Kopfstütze

lässt sich in der Höhe mit nur einem Handgriff verändern.

Thoraxpelotten

stabilisieren den Oberkörper.

Side Impact Buddy

bietet mehr Seitenaufprallschutz.

Armauflage

inklusive kleiner Armstützen.

5-Punkt-Gurt

hält das Kind an den stabilsten Punkten am Körper.

Isofix-Halterung

für besonders sichere und einfache Anwendung.

Fußbank

für stabilen Halt und eine entspannte Sitzposition.



Geführte Gurte

erhöhen die Selbstständigkeit, da sie eigenes Anschnallen ermöglichen.

Side Impact Buddy

absorbiert 40 % der Kraft bei einem Seitenaufprall.





Daten	charlie integral.
Empf. Körpergröße	100 - 150 cm
Länge	48 cm
Breite	43 - 51 cm
Höhe	59 - 79 cm
Sitzhöhe	11 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)
Sitztiefe	27 - 32 cm (kurze / lange Sitzfläche)
Sitzbreite	30 - 37 cm (Rückenseite / vorne)
Scheitelhöhe	51 - 71 cm
Kopfstützenhöhe	20 cm
Unterschenkellänge bei Nutzung der Fußbank	21 - 42 cm
Gewicht	8 kg
Max. Belastbarkeit	45 kg
HMV-Nr.	26.11.06.0036



Optionale Fußbank
ist ergonomisch geformt und
höhenverstellbar.



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf un-
serer Homepage Videos zum
Produkt an.



GMFCS
Level IV-V

Ich bin dein universelles Sitzschalen-Untergestell.

Ich trage dich in nahezu allen handelsüblichen Sitzschalen und begleite dich so an viele deiner Lieblingsorte – ob Zuhause, in der Einrichtung oder durch den Umbau zum Kombi-Untergestell sogar im Außenbereich. Das Tolle an mir ist, dass man meinen Sitzwinkel und sogar meine Sitzhöhe in Sekundenschnelle an deine Bedürfnisse anpassen kann. Einfach das Fußpedal betätigen und schon bin ich auf Bodenniveau oder auf Tischhöhe.

Ich kann auch zum Kombi-Untergestell umgebaut werden, um dich draußen auf dem Schulhof oder im Park zu begleiten.



Trommelbremsen
an den Hinterrädern.





Sitzwinkel-Auslösehebel

kann auch am Schiebebügel oder am Schalenrücken montiert werden.

Schiebebügel

lässt sich im Winkel verändern.

Sitzwinkel

lässt sich in die aktive und passive Position verändern.

Trapezadapter

für alle handelsüblichen Sitzschalen.

Fußpedal

verändert die Höhe des Untergestells.

Laufrollen

für einen leichten Transfer - hinten mit Feststeller gegen ein ungewolltes Wegrollen.

Alternativ: Mit einer Fußpumpe

kann die Höhe hydraulisch eingestellt werden.

Oder: Mit Elektro-Motor

kann die Höhe auch ganz einfach mit einem Handbedienteil verändert werden.

Rahmenfarben

 Verkehrsweiß

 Anthrazitgrau

 Telegrau 4



Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Höhe Sitzschalenaufnahme*	18 - 55 cm (20 - 57 cm**)		
Höhe Sitzschalenaufnahme mit elektr. Höhenverstellung*	26 - 55 cm (28 - 57 cm**)		
Höhe Sitzschalenaufnahme mit hydr. Höhenverstellung*	20 - 56 cm (22 - 58 cm**)		
Höhe Sitzschalenaufnahme mit Kombiuntergestell*	-	25 - 64 cm (27 - 66 cm**)	
Länge Grundrahmen	58 cm	61 cm	75 cm
Länge Gesamt mit Kombiuntergestell	71 cm	76 cm	86 cm
Breite Gesamt	52 cm	54 cm	64 cm
Breite Gesamt mit Kombiuntergestell	62 cm	66 cm	76 cm
Rahmenhöhe	27 cm		
Sitzwinkel	(-) 5° - 35°		
max. Belastung	30 kg	50 kg	75 kg
Gewicht	8 kg	10 kg	12 kg
HMV-Nr.	26.99.01.0022		

* mit 75 mm Laufrollen ** inkl. Trapezadapter



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



GMFCS
Level I-IV



Ich bin dein faltbarer Reha-Buggy.

Ich bin extrem stabil und hochwertig gebaut.

Mich gibt es in vier unterschiedlichen Größen, sodass ich bis zu 75 Kilo locker stemmen kann. Damit du richtig bequem sitzt, lassen sich Sitztiefe, Rückenhöhe und Rückenwinkel deinen Bedürfnissen anpassen.

Wusstest du, dass du dank meiner komfortablen Seitenführung und der gepolsterten Kopfstütze immer gut geschützt und gestützt bist?



corzo xcountry go.



Rücken

kann individuell im Winkel eingestellt werden.

Verdeck
mit Sichtfenster für Begleitperson.

5-Punkt-Gurt

mit gepolstertem Schrittgurt.

Sitz

kann in der Tiefe eingestellt werden.

Rahmen

in vier verschiedenen Größen erhältlich.

3D-Faltmechanismus

ermöglicht leichten Transport.

Reifen

für drinnen und draußen geeignet.

Fußbank

inkl. Wadenband, höhenverstellbar, hochklappbar & abnehmbar.

Korb

für die wichtigen Dinge des Alltags.

**Mit tollem Zubehör:
Kopfstütze
für mehr Halt.**



**Mit tollem Zubehör:
Seitenführung und
Fußbank**





Dank meines 3D-Faltmechanismus kann ich überallhin mitgenommen werden.



Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Rückenlehnenhöhe	55cm	67cm	65 / 85cm	69 / 88cm
Sitztiefe	28 – 34 cm	29 – 35cm	32 – 39 cm	33 – 41cm
Sitzbreite	30cm	34 cm	38 cm	42cm
Unterschenkellänge	29 – 42 cm	32 - 46 cm	32 – 46 cm	33 – 50 cm
Rückenlehnenwinkel	90 ° / 89 °	94 ° / 91 °	90 ° / 88 °	94 ° / 92 °
Sitzwinkel	20 °	25 °		21 °
Gesamtlänge	98cm	102cm		105cm
Gesamtbreite	52cm	57cm	62cm	65cm
Gesamthöhe (mit verst. Handgriffen)	101cm	105cm	117cm	121cm
max. Belastung	45 kg	55kg	75 kg	
Gewicht	12,7kg	13 kg	14 kg	14,7kg
Länge (gefaltet)	117cm	122cm		126cm
Breite (gefaltet)	32cm	31cm	32cm	37cm
Höhe (gefaltet)	34cm	36cm		
HMV-Nr.	18.99/01.1032			



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



GMFCS
Level I-III**Ich bin dein komfortabler, faltbarer Reha-Buggy.**

Ich passe mich mit meiner höhenverstellbaren und abnehmbaren Fußbank deinen Bedürfnissen an. Meine Räder sind nicht nur mit einer zentral bedienbaren Bremse für die hinteren Laufräder feststellbar, sondern für den Transport auch abnehmbar. Die Vorderräder sind sowohl lenkbar, als auch mit einem Richtungsfeststeller versehen. Zu meinen Highlights gehören die bequeme verstellbare Rückenlehne, der im Schulter- und Schrittbereich gepolsterte 5-Punkt-Gurt, das schützende Verdeck und der praktische Ablagekorb.





Schiebebügel

für einen leichten Transfer.

Rückenlehne

kann in fünf Stufen um insgesamt 45° verändert werden.

Alu-Gestell

für einen leichten Transfer.

Ablagekorb

für die wichtigen Dinge des Alltags.

Hintere Laufräder

abnehmbar und mit zentral bedienbarer Feststellbremse.

5-Punkt-Gurt

mit gepolstertem Schulter- und Schrittgurt ermöglicht einen optimalen Halt.

Wadenanlage

kann im Winkel verändert werden.

Fußbank

kann in der Höhe angepasst werden.

Vordere Laufräder

abnehmbar, lenkbar und mit Richtungsfeststeller.

Super einfach: Mit einem Tritt auf den Bremshebel werden beide Hinterräder gleichzeitig gebremst.

Einfach super

ist auch die veränderbare Rückenlehne, die nicht nur eine bequeme Sitzposition ermöglicht, sondern auch vor Seitenwind schützt.





Daten	piper.
Rückenlehnenhöhe	68 cm
Sitztiefe	29 cm
Sitzbreite	26 / 29 / 32 / 35 cm
Unterschenkellänge	25 - 37,5 cm
Rückenlehnenwinkel	90° - 135°
Sitzwinkel	26°
Gesamtlänge	108 cm
Gesamtbreite	59 cm
Gesamthöhe	100 cm
max. Belastung	50 kg
Gewicht	14,5 kg
Länge (gefalteter)	100 cm
Breite (gefalteter)	31 cm
Höhe (gefalteter)	30 cm
HMV-Nr.	18.99.01.1052

**Für einen leichten Transport
kann ich ganz einfach
gefalteter werden.**



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.





Eine Radtour, die begeistert.



Finja und Anouk lieben es, sich den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen. Mit ihrem **momo dreirad.** und dem **rifton dreirad.** sind sie daher regelmäßig unterwegs. Auch unsere anderen Geh- und Fahrhilfen sind richtig gute Helfer und lassen dich die Welt selbstständig entdecken.



Finja und Anouk lieben es auf ihren Rädern die Umgebung zu erkunden. Auf ihr rifton dreirad. und das momo dreirad. können sie sich dabei immer verlassen. Und nicht nur das: Fahrradfahren trainiert Muskeln und Gleichgewicht. Auch stärkt es Psyche sowie Wohlbefinden und fördert das Gehen.

Gehen ist ein natürlicher Vorgang, der erlernt werden muss. Sind es am Anfang noch unkontrollierte Schritte, beherrschen es gesunde Kinder nach circa drei Jahren völlig. Beim Gehen ist der ganze Körper beteiligt – vom Skelett und den Gelenken über Muskeln und Nerven bis hin zu Lunge und Herz.

Anterior- oder Posterior?

Der Ablauf des Gehens ist komplex. Das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagern, die Hüfte drehen, das Becken neigen, den Körper von einer Seite zur anderen wiegen – das sind Prozesse, bei denen Kinder mit eingeschränkten Fähigkeiten unterstützt werden müssen. Schon bei den ersten Gehversuchen sollten Laufhilfen zum Einsatz kommen. Je nach Versorgung und Therapieziel unterscheidet man dabei zwischen Anterior- und Posterior-Laufhilfen. Anterior-Laufhilfen werden vor dem Körper geschoben und haben einen

höheren körperlichen Anspruch an die Kinder. Hier kann die Rumpfmuskulatur trainiert werden. Ist diese geschwächt, empfehlen sich Posterior-Laufhilfen, die hinter dem Körper gezogen werden. Hier wird das Körpergewicht anteilig von der Laufhilfe übernommen.

Sich eigenständig fortbewegen – das funktioniert nicht nur mit der richtigen Gehhilfe. Auch Liege-, Drei- und Therapieräder fördern Kinder mit Behinderung in ihrer Mobilität. Wesentliche Aspekte sind, dass Muskeln und Gleichgewicht trainiert, Fehlstellungen verbessert und Muskelverspannungen reguliert werden. Das Wohlbefinden wird gesteigert, indem der Herzkreislauf- und auch der Verdauungsapparat stimuliert wird. Es tut also Körper als auch Seele gut, mit dem Rad die Umgebung zu erkunden.

Gehen + Fahren.



malte.
76–79



malte outdoor.
80–81



marcy.
82–85



dynamic pacer.
86–89



momo dreirad.
90–93



follow-me momo.
94–97



momo motion.
98–101



momo therapierad.
102–107



momo zubehör.
108–111



rifton dreirad.
112–115



mats.
116–119

GMFCS
Level III-IV

kg
max. 100



46–124 cm

29–113 cm



Ich bin deine vielseitige Posterior-Laufhilfe.

Ich bin immer für dich da – und das schon ab deinem ersten Lebensjahr. Laufen ist mein großes Hobby. Egal, wohin du gehen möchtest, ich folge dir. Wenn du dich auf meinen Handgriffen abstützt, wirst du schnell merken, wie ich dein Körpergewicht übernehme. Zudem unterstützt dich meine spezielle, abduzierte Rahmenform, damit du beim Laufen nicht nach außen pendelst. Meine Beckenpelotte sorgt dafür, dass du aufrecht und gerade gehst. Cool, oder?





Gesäßpelotte

wird mit einem Handgriff zur Rückenlehne.

Unterarmauflagen
mit Handgriffen.

gepolsterte Sitzbank

lässt sich leicht nach hinten klappen.

Aluminiumrahmen

lässt sich schnell zusammenklappen.

Richtungsfeststeller

ermöglicht ein Geradeauslaufen.

Rücklaufstopp

verhindert unbeabsichtigtes Zurückrollen.

EVA-Lenkräder

machen die Laufhilfe wendig.

**Abduzierte Rahmenform**

unterstützt dich beim Gehen und verhindert, dass du nach außen pendelst.

**Aluminiumrahmen**

lässt sich über Faltgelenke einfach zusammenklappen.

Rahmenfarbe
Gr. 0 mini

Lasuritblau
metallic

Rahmenfarben
Gr. 1

Telemagenta (Pink)

Himmelblau

Rahmenfarben
Gr. 2

Lasuritblau
metallic

Verkehrsrot

Rahmenfarben
Gr. 3 und Gr. 4

Anthrazit
metallic

Reinweiß



Daten	Gr. 0 mini*	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Griffhöhe	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Höhe Unterarmstützen	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Griffabstand	22 - 36 cm		30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Sitzhöhe	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Breite Gesamt	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Länge Gesamt	58 cm		70 cm	77 cm	87 cm
Rahmenhöhe (gefaltet)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmaß (L x B x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Gewicht	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,9 kg	10,2 kg
HMV-Nr.	10.46.02.3029				

* Rahmen nicht faltbar



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.





Ich bin deine Outdoor-Posterior-Laufhilfe.

Genau wie mein Bruder bin ich immer dabei, wenn du richtig Meter machen möchtest und biete dir dafür die bestmögliche Unterstützung. Dank meines Outdoor-Outfits fühle ich mich unter freiem Himmel am wohlsten und bin der perfekte Begleiter für einen Spaziergang in der Natur: Meine großen Räder rollen auf jedem Untergrund und meine Trommel- und Feststellbremse geben zusätzliche Sicherheit.



Optionale Kippsicherung
schützt dich vor dem Zurückkippen.

**Rahmenfarben
Gr. 1**



**Rahmenfarben
Gr. 2**



**Rahmenfarben
Gr. 3+4**





neu

Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Griffhöhe	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Höhe Unterarmstützen	46 - 64 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Griffabstand	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Sitzhöhe	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Breite Gesamt	56 cm	66 cm	73 cm	80 cm
Länge Gesamt	66 cm	75 cm	82 cm	92 cm
Rahmenhöhe (gefaltet)	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmaß (L x B x H)	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm	92 x 80 x 37 cm
max. Belastung	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Gewicht	7,1 kg	8,3 kg	9,8 kg	10,2 kg
HMV-Nr.	10.46.02.3052			

Wusstest du, dass ich einer von wenigen Gehtrainern bin, der eine Outdoor-Zulassung hat? Mit größeren und breiteren Rädern und einer Trommel- und Feststellbremse bin ich für große Abenteuer im Freien gewappnet. Spitzenmäßig!



Weitere Infos zum Zubehör findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.





GMFCS
Level II-IV



Ich bin deine Anterior-Laufhilfe und helfe dir bereits bei deinen ersten Gehversuchen.

Ich kann's kaum erwarten, mit dir die ersten Runden zu drehen! Dabei unterstütze ich deine Balance und trainiere gleichzeitig deine Rumpfmuskulatur. Meinen Radstand kann man individuell anpassen: Stellt man ihn etwas kürzer ein, dann bin ich sehr wendig und du kannst dich mehr bewegen. Bei einem langen Radstand gebe ich dir mehr Sicherheit und Unterstützung. Wenn es dir nicht so leicht fällt, geradeaus zu gehen, dann unterstütze ich dich gerne mit meinen Richtungsfeststellern.

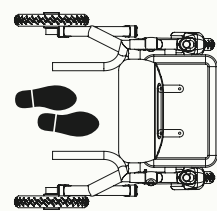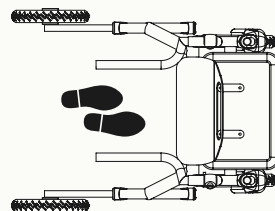



Handgriffe

lassen sich in Höhe und Breite anpassen.

Handbremse

mit extra kleinen Bremsgriffen bei reduzierter Griffweite.

Aluminiumrahmen

super kompakt und in den Größen 2+3 faltbar.

Schleifbremsen an den Hinterrädern

drosseln die Geschwindigkeit, damit du dich voll aufs Gehen konzentrieren kannst.

Ablagekorb

bietet Platz für Spielsachen oder Getränke.

Richtungsfeststeller

unterstützen das Geradeausgehen.

EVA-Reifen

sind widerstandsfähig.


**Dreidimensional einstellbare
Unterarmstützen**

stabilisieren dein Gangbild.

**Optionale Feststell-Handbremsen**

geben dir mehr Sicherheit und Kontrolle – auch in Kombination mit den Unterarmstützen.


**Rahmenfarben
Gr. 0+1**

**Rahmenfarben
Gr. 2**

**Rahmenfarben
Gr. 3**




Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Griffhöhe	30 - 47 cm	38 - 59 cm	53 - 75 cm	63 - 88 cm
Höhe Unterarmstützen	41 - 58 cm	49 - 70 cm	63 - 85 cm	73 - 98 cm
Griffabstand	18 - 32 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	36 - 50 cm
Sitzhöhe	25 cm	30 cm	45 cm	
Breite Gesamt	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
Länge Gesamt	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
Länge Gesamt (teleskopierbarer Radstand)	39 - 47 cm	45 - 55 cm	60 - 74 cm	65 - 79 cm
max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
Gewicht	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg
HMV-Nr.	10.46.02.3049			



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-Vkg
max. 113

39–124 cm



Ich bin dein dynamischer Gehtrainer.

Du möchtest laufen, rennen oder sogar toben? Mit meinen kleinsten Größen unterstütze ich dich von Anfang an und ich freue mich schon richtig doll auf deine ersten Schritte. Ganz sicher findest du in mir dabei Halt.

Wenn du größer und mutiger wirst und am liebsten die Welt erkunden möchtest, dann hilft dir ab Größe 1 mein Multi-Positionierungs-Sattel. Dieser übernimmt einen Teil deines Körpergewichts und kann dein Becken in fünf Richtungen so fein positionieren, wie du es brauchst.

Du kannst mich vor dir herschieben oder hinter dir herziehen. In jedem Fall behältst du mit meiner großen Unterstützungsfläche immer eine aufrechte Körperhaltung. Mein optionaler dynamischer Oberahmen unterstützt dich bei der Gewichtsübernahme und -verlagerung, die für ein ergonomisches Gangbild nötig sind. Gut zu wissen: Alle Änderungen und Anpassungen können an mir ohne Werkzeug vorgenommen werden.





Mein Multi-Positionierungs-Sattel (MPS) wird dich begeistern:

Mit ihm kann deine Beckenposition so schnell und fein in unterschiedliche Richtungen eingestellt werden, dass Aufrichtung, Schrittlänge und Gewichtsübernahme an dich angepasst werden können. Mit der richtigen Einstellung der Satteltiefe wird zum Beispiel dein Becken in eine optimale Position in Bezug zum Oberkörper gebracht. Mithilfe des Sattelwinkels wird dein Becken in eine Vor- oder Rücklage gebracht. Die Hüftanlage lässt sich in Höhe und Tiefe verändern, damit deine Hüfte den notwendigen Halt bekommt. Und mit der Sattelhöhe erfolgt eine Feineinstellung der Beckenposition, sodass du selbst bestimmen kannst, wie viel von deinem Körpergewicht der MPS übernehmen soll. Toll, oder?



Es muss nicht immer die Vollausstattung sein. Mit meiner Brustanlage in Kombination mit Handgriffen und dem Multi-Positionierungs-Sattel (MPS) biete ich dir bereits viele Möglichkeiten bei der Positionierung.



gepolsterte Unterarmauflagen

übernehmen einen Teil
des Körpergewichts.

dynamischer Oberrahmen

unterstützt das Gangbild und lässt
eine vertikale Bewegung von 8 cm
und eine horizontale Bewegung
von 5 cm während des Gehens zu.

Multi-Positionierungs-Sattel

passt sich schnell an die
Beckenposition an.

Mittelsäule

kann dank Gasdruckfeder in der Höhe
verändert werden und unterstützt bei
der Aufrichtung in den Stand.

Leichte und stabile Bauweise

vermittelt Sicherheit.

Richtungsfeststeller

unterstützen das
Geradeausgehen.

Laufrollen

mit Schleifbremse, Rücklaufstopp,
Feststellbremse und Richtungsfeststeller.

Distanzmesser

zeichnet den
Therapiefortschritt auf.

**Modulares
System****Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:**

Oberrahmen in den Größen 2 und 3 lassen
sich dem Standard-Untergestell entnehmen
und auf das Kombi-Untergestell montieren.

Multifunktionale Rumpfstütze

Je nachdem wie viel Unterstützung du
benötigst, kann sie in der Tiefe,
Höhe und im Winkel an
dich angepasst werden.



Rahmenfarbe
Gr. 0 mini



Limettengrün

Rahmenfarben
Gr. 1



Weiß



Limettengrün

Rahmenfarben
Gr. 2



Weiß



Rot

Rahmenfarben
Gr. 3



Blau



Schwarz

Rahmenfarbe
Gr. 4



Schwarz



Dank der Mittelsäule mit Gasdruckfeder kann ich schnell in der Höhe angepasst werden, was einen großen Vorteil bringt: Der Transfer vom Sitz in den Stand wird damit superleicht!

Daten		Gr. 0 mini	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
empfohlene Ellbogenhöhe		39 – 52 cm	47 – 70 cm	61 – 89 cm	81 – 119 cm	86 – 124 cm
Breite gesamt	Standard-Untergestell	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
	Kombi-Untergestell	-	-	76 cm	81 cm	-
Länge gesamt	Standard-Untergestell	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
	Kombi-Untergestell	-	-	91 cm	103 cm	-
Rahmenhöhe	Standard- / Kombi-Untergestell	32 cm	41 – 53 cm	55 – 69 cm	72 – 98 cm	79 – 104 cm
Höhe Untergestell (ohne Oberrahmen)	Standard- / Kombi-Untergestell	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
Gewicht	Standard-Untergestell	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg
	Kombi-Untergestell	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-
	Standard-Oberrahmen	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
	Dynamischer Oberrahmen	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg
Bewegung des dynamischen Oberrahmens	Vertikal	-	3,5 cm	8 cm		
	Horizontal	-	4 cm	5 cm		
max. Belastung		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg
HMV-Nr.		10.46.02.3005 (Gr. 0 mini) 10.46.02.3044 (mit Standard-Untergestell) 10.46.02.3046 (mit Kombi-Untergestell)				



Weitere Infos zum Zubehör findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.



GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



30-98 cm

16-23 cm

Ich bin dein cooles Dreirad.

Ich bin schnell zur Stelle, wenn du Lust hast, eine Runde um den Block oder See zu fahren. Das macht nicht nur Spaß, wir trainieren und bewegen auch noch deine Gelenke, deine Muskulatur und deinen Kreislauf. Du kannst mich auch in den verschiedensten Varianten, Sattelgrößen, Lenkerarten und Farben auswählen. Dein Alter spielt keine Rolle, denn es gibt mich in vielen verschiedenen Größen: für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.





momo dreirad.



Vielfältiges Zubehörprogramm

zur optimalen Unterstützung und
individuellen Ausstattung
verfügbar.



**Du hast die Wahl! Zwischen vielen Lenkern,
Sätteln, Fußschalen, Kopfstützen und
verschiedenen Antrieben!**



Rahmenfarben 12", 16" & 18" / 12"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Telemagenta (Pink) / Reinweiß
-  Türkisblau / Reinweiß

Rahmenfarben 20" & 24" / 20"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Pastellblau / Reinweiß
-  Kiwisorbetgrün / Reinweiß

Rahmenfarben 24", 26" & 26" (XL)

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Elfenbein / Reinweiß
-  Schwarz matt / Reinweiß



Daten	12"	16/ 12"	16"	20"	24/ 20"	24"	26"	26" (XL)
Pedal bis Oberkante Sattel*	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	40 cm	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	
Radstand	68 cm	75 cm	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Einstiegshöhe	16 cm		18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Länge über Alles	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Breite über Alles	58 cm	65 cm		69 cm		75 cm		
max. Belastung	40 kg	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
Leergewicht	12 kg	13,5 kg	14,5 kg	17 kg	18,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg
HMV-Nr.	22.51.02.0053	22.51.02.0054	22.51.02.0054	22.51.02.0055	22.51.02.0051	22.51.02.0051	22.51.02.0052	22.51.02.0052

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.





Ich bin deine clevere Eltern-Kind-Tandemkupplung.

Damit du bei Ausflügen dabei sein kannst, hänge ich mich für dich so richtig rein! Mit mir kann dein **momo dreirad** nämlich an das Fahrrad deiner Eltern gekoppelt werden. Das geht kinderleicht mit Adaptern an nahezu jedem Fahrrad. Einmal montiert, kann ich mit nur wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug verbunden werden – auch ganz spontan während eines Ausflugs, etwa wenn du erschöpft bist und der Verkehr dich verunsichert. Und nach einer kurzen Pause geht es dann wieder eigenständig los!



Einmalige Vorbereitung am Dreirad.



Mit mir koppelst du dich einfach und sicher an das Rad deiner Eltern, wenn du einmal müde bist, keine Kraft hast weiterzufahren oder der Straßenverkehr zu gefährlich wird.





geringes Eigengewicht
für einen leichten, dauerhaften
Transport am Erwachsenenrad.

verschiedene Adapter

ermöglichen die Montage an Rädern mit Naben-
oder Kettenschaltung und Schnellspanner bzw.
mit Vollachse und Muttern und mit Nabenschal-
tung und Clickbox.

Joch

passt an alle 26"- und
28"-Erwachsenenräder.

Klemmplatte

kann kinderleicht auf eine
Dreiradgröße eingestellt werden.

Hauptbügel

sichert die Achsaufnahme
und die Transporthöhe.

Drehpunkt

sorgt für Sicherheit. Somit können sich das
Dreirad und das Elternrad unabhängig neigen.





Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
erforderliche Größe des Zugfahrrades	26" - 29"		
max. Dreiradgröße	12" (auch für 16" + 20" zu verwenden)	16 / 12" + 16" + 20"	24 / 20" + 24" + 26"
max. Zuggewicht	40 kg	60 kg	80 kg
Gewicht	5,1 kg		8,7 kg



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



cm
42-98

cm
18-23

Ich bin dein bewährtes Dreirad mit E-Antrieb.

Ich unterstütze da, wo deine eigene Kraft nicht ganz ausreicht. Sei es bei kurzen oder langen Fahrten in die Stadt oder ins Grüne. Da ich einen geräuschlosen Direktantrieb besitze, genießt du ganz ungestört deine Ausflüge. Zusätzlich unterstützt dich meine optionale Anfahrhilfe, damit du beim Start auf Touren kommst. Für geübte Fahrer gibt es meinen Antrieb auch in einer „Fortgeschrittenen-Version“. Diese ermöglicht dir einen kraftvolleren Antrieb.

Auch bei meiner „Beginner-Version“ lässt sich über das Display der Eco-, Standard- oder Powermodus ansteuern.





**DirectPower E-Bike Motor**

ist bürstenlos und ohne Getriebe konstruiert, minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß und lässt Motorgeräusche entfallen.

**LCD-Display**

zeigt dir Angaben zu Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit und Akkustatus – ist gut lesbar auch in heller / sonniger Umgebung.

**Taster- oder Drehgriffbedienung**

ermöglicht dir auch während der Fahrt, den Modus und ggf. die Anfahrhilfe einzustellen.

**Rahmenfarben 16"**

- Fenstergrau / Reinweiß
- Telemagenta (Pink) / Reinweiß
- Türkisblau / Reinweiß

Rahmenfarben 20" & 24" / 20"

- Fenstergrau / Reinweiß
- Pastellblau / Reinweiß
- Kiwisorbetgrün / Reinweiß

Rahmenfarben 24", 26" & 26" (XL)

- Fenstergrau / Reinweiß
- Elfenbein / Reinweiß
- Schwarz matt / Reinweiß



Egal wohin die Reise gehen soll, du kannst dich immer auf mich verlassen.



Der Akku kann zum Laden auch herausgenommen werden. Der Ladezustand lässt sich am Display ablesen.



Daten	16“	20“	24/20“	24“	26“	26“ (XL)
Pedal bis Oberkante Sattel*	42 - 62cm	49 - 71cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87cm	72 - 94 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81cm	68 - 91cm	75 - 98 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	39cm	45cm	54 cm	52cm	58 cm	
Radstand	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Einstiegshöhe	18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Länge über Alles	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Breite über Alles	65 cm	69 cm		75 cm		
max. Belastung	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
Gewicht	24,5kg	27 kg	28,5kg	29,5kg	31,5kg	31,7kg
HMV-Nr.	22.51.04.0005					

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Weitere Infos zu Zubehör und Begurtungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.



GMFCS
Level I-V
kg
max. 100
30–96 cm
16–23 cm**Ich bin dein Therapierad für mehr Balance.**

Ich bin für dich da, wenn das Wetter zur Spritztour um den See einlädt. Doch ein Ausflug mit mir kann noch viel mehr. Je nachdem, wie sicher du beim Fahrradfahren bist, lassen sich meine Stützräder von starr auf sehr weich federnd einstellen. Damit trainierst du deine Balance spielend leicht. Außerdem sehe ich wirklich cool aus: Ich bin von einem Fahrrad ohne unterstützende Funktionen kaum zu unterscheiden.





momo therapierad.

Lenker

gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen.

individueller Antrieb

vom starren Antrieb über 7-Gang-Freilaufbremsnabe bis zur elektrischen Unterstützung.

Sattel

gibt es in verschiedenen Formen und Größen.

zwei Bremssysteme

ab 16" bestehend aus Felgen- und Trommelbremse.

Pedale

können individuell konfiguriert werden.

Stützräder

lassen sich von starr bis sehr weich einstellen.

serienmäßig tiefer Einstieg

ermöglicht ein bequemes Aufsteigen und einen eigenständigen Transfer.

Vielfältiges Zubehörprogramm

zur optimalen Unterstützung und individuellen Ausstattung findest du in diesem Katalog.

Du hast die Wahl! Zwischen vielen Lenkern, Sätteln, Fußschalen, Kopfstützen und verschiedenen Antrieben – vom starren Zahnrad bis zur 3-Gang-Nabenschaltung mit Rückfahroption!



Rahmenfarben 12" & 16"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Telemagenta (Pink) / Reinweiß
-  Türkisblau / Reinweiß

Rahmenfarben 20"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Pastellblau / Reinweiß
-  Kiwisorbetgrün / Reinweiß


Rahmenfarben 24" & 26"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Elfenbein / Reinweiß
-  Schwarz matt / Reinweiß



Dynamische Stützräder

lassen sich an deine Fähigkeiten anpassen. Starr eingestellt, vermitteln sie dir zunächst Sicherheit und Vertrauen. Im Laufe der Therapie lassen sie sich bis zu sehr weich federnden Stabilisierungshilfen verändern. Sie balancieren Kurvenfahrten kinderleicht aus und bieten auch bei unbefestigten Wegen genügend Antriebskraft.

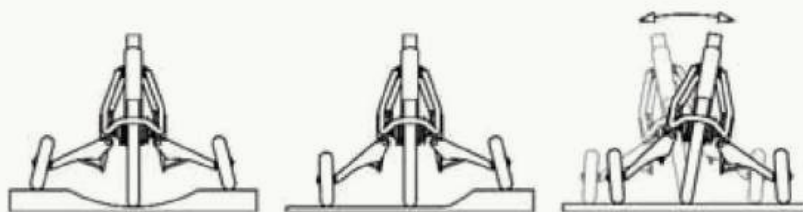

Daten	12"	16"	20"	24"	26"
Pedal bis Oberkante Sattel*	30 - 43 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	58 - 80 cm	70 - 92 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	33 - 40 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	61 - 84 cm	73 - 96 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	39 cm	45 cm	53 cm	58 cm
Radstand	64 cm	76 cm	89 cm	104 cm	112 cm
Länge über Alles	99 cm	122 cm	148 cm	168 cm	178 cm
Einstiegshöhe	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
Breite über Alles	43 cm	52 cm	62 cm	71 cm	76 cm
max. Belastung	35 kg	50 kg	65 kg	100 kg	
Gewicht	10,5 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg
HMV-Nr.	22.51.01.0014				

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



momo therapierad.

Mit E-Antrieb.

Wusstest du schon, dass dein momo therapierad. auch mit E-Antrieb ausgestattet werden kann? Der unterstützt dich da, wo deine eigene Kraft nicht ganz ausreicht. Sei es bei kurzen oder langen Fahrten in die Stadt oder an den See.

Die Grundlage unseres Systems ist der DirectPower E-Antrieb von Heinzmann im Vorderrad. Hierbei handelt es sich um einen geräuschlosen Direktantrieb, der optional mit einer Anfahrhilfe erhältlich ist.

Für geübte Fahrer gibt es den Antrieb auch in einer „Fortgeschrittenen-Version“. Diese ermöglicht dir einen kraftvolleren Antrieb. Auch bei der „Beginner-Version“ lässt sich über das Display der Eco-, Standard- oder Powermodus ansteuern.

Mit diesem kraftunterstützenden Elektroantrieb bieten wir eine ideale Ergänzung für dein **momo therapierad.** und helfen dir gesteckte Ziele zu erreichen.

Für eine individuelle Beratung stehen wir gerne zur Verfügung.

DirectPower E-Bike Motor

ist bürstenlos und ohne Getriebe konstruiert, minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß und lässt Motorgeräusche entfallen.



Taster- oder Drehgriffbedienung

ermöglicht dir auch während der Fahrt, den Modus und ggf. die Anfahrhilfe einzustellen.



LCD-Display

zeigt dir Angaben zu Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit und Akkustatus - ist gut lesbar auch in heller / sonniger Umgebung.





**Der Akku kann zum Laden auch
herausgenommen werden.
Der Ladezustand lässt sich am
Display ablesen.**





Rundlenker mit Bremshebelring



Lenkeinschlagbegrenzer



Vorbauverlängerung



Standard-Sattel



Gel-Sattel



Einradsattel



Mofa-Sattel

	Daten	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Standard-Sattel	Breite	15 cm	15 cm	18 cm
	Länge	21 cm	24 cm	26 cm
Gel-Sattel	Breite hinten	19 cm	24 cm	-
	Breite vorne	4 cm	7 cm	-
	Länge	24 cm	27 cm	-

	Daten	Gr. 1
Einradsattel	Breite hinten	11 cm
	Breite mittig	6 cm
	Breite vorne	8 cm
	Länge	25 cm
Mofa-Sattel	Breite hinten	26 cm
	Breite vorne	9,5 cm
	Länge hinten	12 cm
	Länge gesamt	25 cm

Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer

Kurbelverkürzer

Spezialkurbel für Kniekontraktur

	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Standard-Sattelstütze	für 12" + 16" / 12"	für 16"	für 20" - 26"
T-Sattelstütze	für 12" + 16" / 12"	für 16" + 20"	für 24" + 24" / 20" + 26"



Aufnahmebügel
in vier Größen



mit passender Halterung



Daten	Gr. 1	Gr 2.	Gr. 3	Gr. 4
max. Höhe*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Tiefe	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

*gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte



Classic-Lenker



Touring-Lenker



Rundlenker



Multifunktionslenker

	Daten	Gr. 1	Gr 2.	Gr. 3	Gr. 4
Classic-Lenker	Breite	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
Touring-Lenker	Breite	55 cm	58 cm	-	-
	Tiefe	17 cm	17 cm	-	-
Rundlenker	Breite	40 cm	43 cm	48 cm	-
	Tiefe	17 cm	21 cm	25 cm	-
Multifunktionslenker	Breite	61,5 cm	-	-	-
	Tiefe	16,5 cm	-	-	-

Fußpositionierungs-
pedale

Heimtrainerpedale



Ergotec Pedale



Fußschale

Fußschale mit
BeinführungFußschale mit
dynamischer
BeinführungDynamische und breiteneinstellbare
Rücken- und Beckenpelotten

	Daten	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Dynamische Rückenpelotte	Breite	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Dynamische Beckenführungspelotte				
Breiteneinstellbare Rückenpelotte	Breite	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm
Breiteneinstellbare Beckenführungspelotte				

Handpositionierungshilfe



Brustgurt



Positionierungsweste



	Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Handpositionierungshilfe	Breite vorne	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Brustgurt	Breite	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Länge	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Positionierungsweste	Breite innen	-	8 cm	9 cm	12 cm
	Breite gesamt	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Höhe Seite	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Höhe gesamt	-	28 cm	30 cm	35 cm



Schiebestange



**Lenkung für Begleitperson mittels
Lenkgestänge**



**Stützradrahmen als Montagesatz
für handelsübliche Zweiräder**
(Naben-Einbaubreite min. 120 mm)



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage ein Video zum
Zubehörsortiment an.



GMFCS
Level I-V


kg
max. 140




38-91 cm

Ich bin dein optimiertes Dreirad.

Ich begleite dich beim Training. Durch mich wirst du mobil und stärkst gleichzeitig deine Gleichgewichtsfähigkeit, deine räumliche und visuelle Wahrnehmung und deine unteren Extremitäten. Wie du es von mir gewohnt bist, können alle meine Verstellungen werkzeuglos vorgenommen werden. Mein vielfältiges Zubehör ermöglicht es, mich individuell auf deine Bedürfnisse anzupassen. So biete ich dir vier verschiedene Kopfstützen und unterschiedliche Lenkgriffe und Bremsen für deine Begleitperson. Auch meine Rückenlehne und mein Pedalwiderstand lassen sich so einstellen, wie du es brauchst. Auf geht's!





rifton dreirad.

Kopfstützen

gibt es in drei verschiedenen Varianten.

Lenker

gibt es als gerade Version
oder als Rundlenker zum bequemen Abstützen.

Rückenlehne

kann in ihrer Neigung auf
0°, 7 1/2° und 15° eingestellt und zudem für
den Transport abgenommen und
zusammengeklappt werden.

Räder mit Schnellverschluss

können durch den Schnell-
spanner blitzschnell abge-
nommen werden und sind
zudem absolut
pannensicher.

Pedalriemen

können gelöst und in
jede beliebige Position
um das Pedal herum
bewegt werden.



**Als Neuerung möchte ich dir meinen
stabilen Standfuß vorstellen. Er verwandelt
dein Dreirad in einen Heimtrainer. So kannst
du erstmal das Radfahren bequem von
zu Hause lernen.**



Rahmenfarbe small



Türkis (TEA)

Rahmenfarbe medium



Rot (RED)

Rahmenfarbe large



Blau (BLU)



Daten		rifton dreirad. small	rifton dreirad. medium	rifton dreirad. large
Gesamthöhe		54 cm		76 cm
Gesamtlänge		112 cm	135 cm	165 cm
Gesamtbreite		67 cm	70 cm	80 cm
Gesamtlänge ohne hinteren Griff (Räder und Vorderteil entfernt)		91 cm	104 cm	124 cm
Gesamtlänge mit hinterem Griff (Räder und Vorderteil entfernt)		122 cm	130 cm	152 cm
Sitz bis zur Oberkante der Rumpfstütze (max. Höhe)		51	61 cm	
Pedale bis Oberkante Sattel		38 - 51 cm	48 - 71 cm	64 - 91 cm
Einstellbereich der Seitenteile	kleine Rumpfstütze	15 - 30 cm		-
	große Rumpfstütze	-	24 - 39 cm	
Max. Belastung		57 kg	113 kg	140 kg
Gewicht		22 kg	25 kg	29 kg



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level I-V


kg
max. 75




42-75 cm


(-)5° - 20°


26 cm

Ich bin dein treues und mitwachsendes Liegedreirad.

Lass uns Freunde für's Leben sein! Denn die helfen sich stets gegenseitig und sind füreinander da. Durch mein mitwachsendes System begleite ich dich von klein auf. Und da Bewegung so wichtig ist und gleichzeitig so gut tut, freue ich mich schon auf viele gemeinsame Abenteuer mit dir. Freu dich drauf, meine Pedalen einfach und leicht zu treten. Denn mein besonderer Sitz lässt Beugungen in der Hüfte und in den Knien durch eine stabile Sitzposition einfach entstehen. So erreichst du ganz spielend – mit wenig Kraft – deine Ziele. Steig' ein und lass' uns gemeinsam die Welt entdecken.



Veränderbarer Radstand

ermöglicht eine lange Nutzungsdauer für Nutzer mit einer Körpergröße von 110 – 175 cm.



Rahmenasymmetrie

sorgt für einen freien Transferzugang und ermöglicht ein leichtes und selbstständiges Ein- und Aussteigen.







Unterlenkung
ist passend zur Sitzergonomie tiefenverstellbar und bietet dadurch die Möglichkeit einer entspannten Haltung beider Arme beim Lenken.



Regencape
schützt den Sitz vor Witterungseinflüssen.

Rahmenfarben

○ Reinweiß

● Türkisblau

● Reinorange



Lass uns Abenteuer erleben und gemeinsam die Welt entdecken! Ich begleite dich durch meinen genialen und mitwachsenden Rahmen für eine sehr lange Zeit.



Automatischer Kettenspanner
verhindert effektiv das Durchhängen der Kette.



Ergonomischer Sitz

bietet auch eine sehr niedrige Sitzposition und sorgt in Verbindung mit der besonderen Rahmengeometrie für eine optimale Kurvenlage.



Daten	mats.
Körpergröße	110 – 175 cm
Sitzbeinlänge	ca. 65 – 110 cm
Innenbeinlänge	46 – 83 cm
Tretlagerhöhe	32,5 cm
Einstiegshöhe	20 cm
Sitzhöhe	32 – 42 cm
Sitzwinkel	0 – 20°
Sitztiefe	26 cm
Länge der Rückenlehne	50 cm
Radstand	115 – 142 cm
Spurbreite	69 cm
Länge über alles	165 – 192 cm
Breite über alles	76 cm
Höhe über alles	65 – 88 cm
Max. Sitzbreite schmaler Sitz	37 cm
Max. Sitzbreite breiter Sitz	46 cm
Wendekreis	243 – 395 cm
Leergewicht	29 kg
Max. Belastung	75 kg
HMV-Nr.	22.51.02.0063

Stehen + Transfer.



Scherzen lauschen – das macht Laune.



Siphon ist so glücklich mit seinem **till.**
Aufmerksam beobachtet er, wie
Ergotherapeut und Außendienstmitarbeiter
Jan die Feineinstellungen an den flexiblen
Kniepelotten **FKP.** vornimmt und lauscht
seinen Scherzen.

Stehen + Transfer.



Endlich kann Siphon auch in der Schule stehen und ist nicht mehr nur auf sein Pflegebett angewiesen. till. macht es möglich! Endlich kann er mit seinen Freunden auf Augenhöhe sein und in der Schule ganz andere Dinge entdecken. Was Siphon noch nicht weiß: till. ermöglicht nicht nur neue Einblicke, das Schrägliegesystem hat noch viel mehr zu bieten!

Kinder und Jugendliche, die auf Sitzhilfen und Rollstühle angewiesen sind, sollten lange Sitzphasen mit regelmäßigen Stehübungen unterbrechen. Denn zu langes Sitzen ist ungesund und fördert Krankheiten wie Muskelverkürzungen. Es kommt nicht darauf an, besonders lange zu stehen, das Stehen an sich – auch für kurze Zeit – reicht aus, um Folgeerkrankungen des Sitzens zu vermeiden. Und Stehen tut dem Kind und seiner Gesundheit richtig gut: Es erhöht die Knochendichte, fördert die Verdauung, vermindert Gelenkkontrakturen und erleichtert die Atmung. Die Verlagerung des Gewichts auf die Beine hilft, starke und stabile Gelenke um Hüfte, Knie und Knöchel zu entwickeln.

Stehen ist aber nicht nur für die Gesundheit wichtig: Kinder sind in einer aufrechten Haltung viel aufmerksamer und können ihre Umgebung besser wahrnehmen. Stehend sind sie immer mittendrin und können sich mit ihren Spielkameraden austauschen. Wenn Stehtrainer eine sehr kleine Standfläche bieten, ist es für die Kleinen oder Großen leicht, ganz nah an ihre Freunde oder auch mal an eine Schultafel heranzukommen.

Richtig Stehen geht ganz leicht

Beim Stehtraining ist es wichtig, auf die Stellung des Beckens zu achten. Mit den richtigen Einstellungen und Körperstützen unserer Stehhilfen steht das Becken immer symmetrisch, sodass auf beiden Beinen dasselbe Gewicht lastet. Kopf und Körper befinden sich in der Körpermittellinie. Je nach Erkrankung oder Therapieziel kann das Kind nach vorne oder hinten geneigt werden. Stehen in Bauchlage stimuliert das Kind zu einer aktiveren Dehnung. In der Position in Rückenlage fühlen sich Kinder wohl, die ihren Kopf nicht gut halten können.

Stehen + Transfer.



trixi.
124–125



till.
126–131



todd.
132–135



tim.
136–139



rifton stander. supine
140–143

GMFCS
Level II-IIIkg
max. 60

65-140 cm

bis 10°

**Ich bin dein dynamischer Stehtrainer.**

Mit mir kannst du spielend leicht deine Bewegungsvielfalt ausleben. Denn ich neige mich in meiner dynamischen Variante mit dir mit! Und damit unser gemeinsames Stehtraining besonders effektiv ist und zeitgleich viel Spaß macht, gibt es mich mit **stixi.** App. Dort kannst du nicht nur deinen Therapiefortschritt dokumentieren, sondern auch ein cooles Bewegungsspiel nutzen. So verlängerst du spielerisch deine Stehzeiten. Du magst es lieber klassisch? Kein Problem, mich gibt's auch als starre Variante. Du hast die Wahl!

neu



**Individuelle Einstellbarkeit
des Widerstands**
(von 1 – 4) jeder Seite über
vier Polymere.



stixi. – die neue geniale App
mit interaktivem
Spiel und Stehtagebuch.



**Halterung
für Unterstützte Kommunikation
oder für stixi. App**

Beckenpelotte

Flexible Knie-Positionierer (FKP.)
sind einzeln dreidimensional
verstellbar. In der Länge einstellbare
Anlagebänder passen sich optimal
an die Form des Knies an.

Stützrollen (75 mm)
mit Feststeller.

Armauflagen

Therapeutisch
bietet viel Platz für Aktivitäten.

Mittelsäule inkl. Knaufpolster

Integrierte Profilschienen
zur Aufnahme von Fersenkanten.

**Dynamische
Winkelverstellung der Mittelsäule**
bis 10° in alle Richtungen.

**Schiefergraue Weste
mit manni. Stick**

ist in Größe und Höhe einstellbar
und unterstützt die sensorische
Wahrnehmung.



**Knaufpolster zur Abdeckung
des Drehgriffs**





**Verschiedene Möglichkeiten
der Fußpositionierung
lassen unterschiedliche
therapeutische Ziele zu.**



Daten	Gr. 0 (mini)	Gr. 1	Gr. 2
Körpergröße	65 cm - 95 cm	85 cm - 115 cm	105 cm - 140 cm
Sternumhöhe	42 cm - 62 cm	58 cm - 86 cm	76 cm - 100 cm
Tischhöhe von der Bodenplatte	48 cm - 72 cm	63 cm - 100 cm	80 cm - 115 cm
Länge gesamt	80 cm	88 cm	98 cm
Breite gesamt	50 cm	60 cm	70 cm
max. Belastung	20 kg	40 kg	60 kg
Gewicht mit dynamischer Mittelsäule	16 kg	19 kg	22 kg
Gewicht mit fester Mittelsäule	13 kg	15 kg	18 kg
HMV-Nr.	in Beantragung		



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



Positioniert dich gut.

GMFCS
Level IV-V



Ich bin dein anpassungsfähiges Rückenschrägliegesystem.

Mit mir ist dein Transfer von der liegenden in die stehende Position sicher und komfortabel möglich – auch wenn du nur wenig aktiv mitmachen kannst. Ich passe mich über meine vielfältigen Einstellmöglichkeiten deinen besonderen Körperformen sehr genau an – und das von Kopf bis Fuß.

Regelmäßiges Stehen wirkt sich positiv auf deine Körperstrukturen und -funktionen aus und fördert deine Aktivitäten.

Dabei unterstütze ich dich und biete dir zugleich Sicherheit und Gewichtsübernahme. Mit mir hast du eine neue Perspektive – du bist mit deinen Freunden auf Augenhöhe und kannst mit mir geschoben werden.

So ist die Teilhabe in verschiedenen Situationen und Positionen während des Stehtrainings möglich.

Höheneinstellung

erfolgt ganz einfach via Motor oder mit Gasdruckfederunterstützung.



Wachstumsanpassungen

können leicht über Längenverstellung des Rückens und der Beine vorgenommen werden.










Außerdem kann man meine Höhe und meinen Winkel leicht verstellen. So steht dem Spielen mit deinen Freunden nichts mehr im Wege.

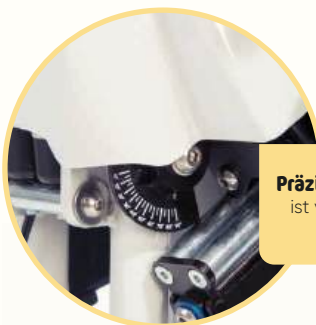

Präzise Kantelung der Liegefläche
ist von 0 – 90° via Gasdruckfeder möglich.





**Kopfstütze mit winkelverstellbarer
Seitenführung**

ist flexibel, praktisch, individuell
anpassbar und bietet einen großen
therapeutischen Nutzen.



Flexible Knie-Positionierer (FKP)

sind einzeln dreidimensional
verstellbar. In der Länge einstellbare
Anlagebänder passen sich optimal an die
Form des Knies an.

Eine optimale Fußposition

wird durch einzeln 3D-verstellbare
Fußstützen erreicht. Diese können bis
auf den Boden herabgelassen werden.



Eine perfekte Beinführung

wird durch längen- und
winkelverstellbare Beine ermöglicht.





Präzise Abduktion der Beine
ist von 0-30° via Stellschraube
möglich.



Daten		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Körpergröße		75 - 115 cm	100 - 135 cm	120 - 160 cm	145 - 185 cm
Rücken	Becken- / Thoraxbreite	14 - 27 cm	17 - 31 cm	20 - 37 cm	27 - 46 cm
	Länge Liegefläche	30,5 - 43 cm	38 - 48 cm	49 - 61 cm	58 - 69 cm
Beine	Sohle bis Knie	20,5 - 30,5 cm	27,5 - 37 cm	32,5 - 45 cm	42 - 54 cm
	Knie bis Schritt	12 - 18,5 cm	16,5 - 24 cm	20 - 29,5 cm	24,5 - 34 cm
	Kniewinkel	0° - 65°			
	Hüftwinkel	0° - 45°			
	Abduktion	0° - 30°			
	Niveausausgleich	0 - 5 cm			
Füße	Spitzfuß	0° - 20°			
	Senkfuß	0° - 15°			
	Rotation	0° - 15° je Richtung			
Höhe Liegefläche (für den Transfer)		53,5 - 73,5 cm	60 - 85 cm	71,5 - 93,5 cm	82,5 - 104,5 cm
Kantelung		0° - 90°			
Transportmaße (L x B x H)		95 x 51 x 75 cm	105 x 61 x 85 cm	125 x 76 x 97 cm	152 x 77 x 110 cm
max. Belastung		30 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Gewicht		30 kg	35 kg	80 kg	90 kg
HMV-Nr.		28.2902.1057			



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-IV



Ich bin dein wendiger Stehtrainer.


Mit mir kannst du üben, auf eigenen Beinen zu stehen. Regelmäßiges Stehen trainiert deine Muskeln und verbessert die Knochendichte. Meine Körperstützen, die sich in der Höhe, Breite und Tiefe verändern lassen, passen sich deinen Körpermaßen an. Meine beiden großen Antriebsräder machen die Sache rund. Mit diesen kommst du überall hin – ganz selbstständig.



Flexible Knie-Positionierer (FKP)

sind einzeln dreidimensional verstellbar. In der Länge einstellbare Anlagebänder passen sich optimal an die Form des Knies an.



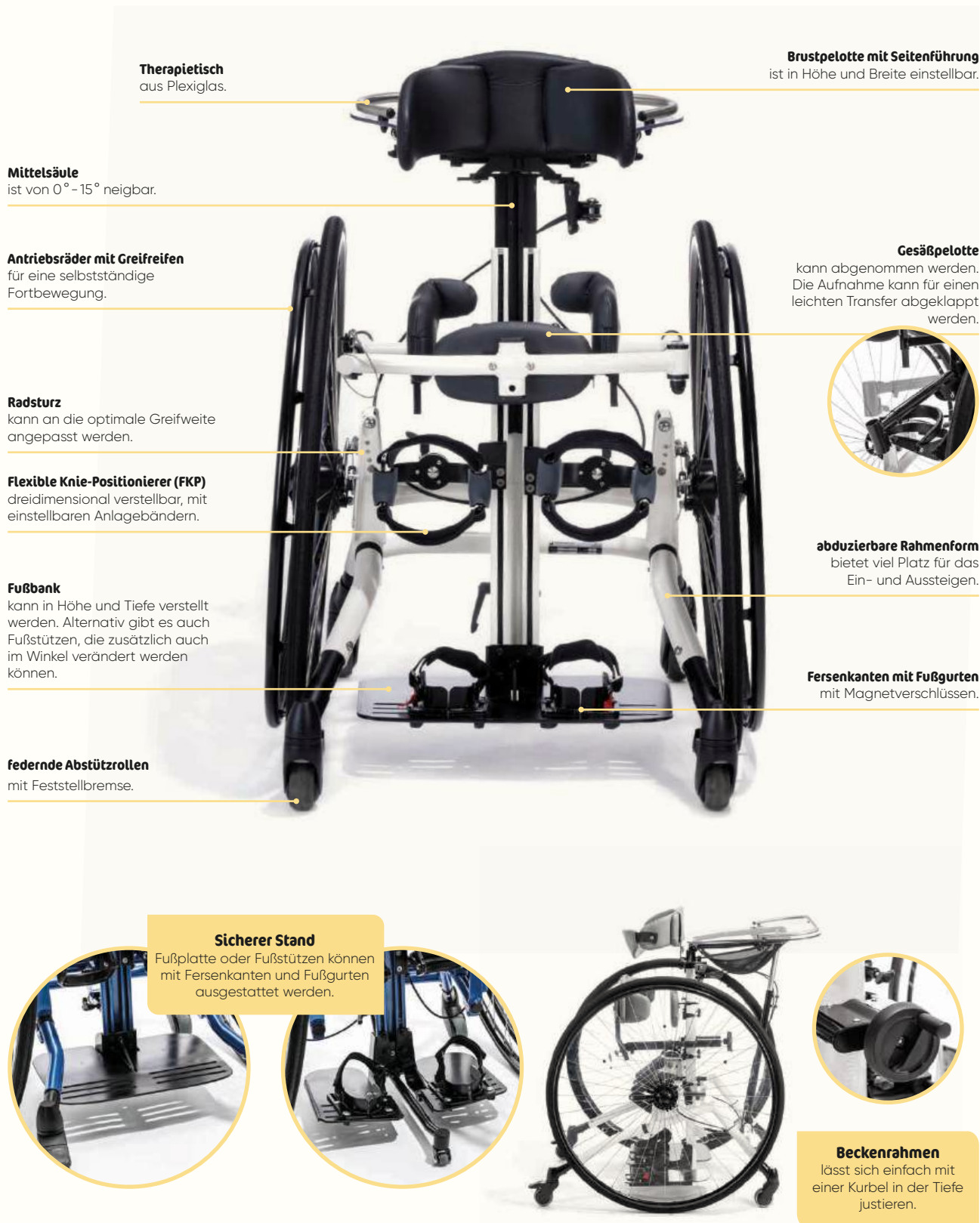



Daten		Gr. 1		Gr. 2			Gr. 3		Gr. 4		
Körpergröße		75 – 110 cm		100 – 130 cm			120 – 155 cm		150 – 175 cm		
Radgröße		24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
Griffhöhe: Fußplatte – Greifreifen oben		40 – 48 cm	50 – 58 cm	57 – 65 cm	64 – 69 cm	72 – 80 cm	60 – 68 cm	71 – 79 cm	82 – 90 cm	87 – 95 cm	
empfohlen ab Ellbogenhöhe		50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	92 cm	82 cm	92 cm		97 cm	99 cm
Breite Greifreifen oben	0°	-	-	-	-	-	65 cm		67 cm		
	3°	-	-	54 cm	53 cm	52 cm	61 cm	60 cm	63 cm	62 cm	61 cm
	6°	-	-	51 cm	49 cm	47 cm	57 cm	55 cm	59 cm	57 cm	56 cm
	9°	45 cm	44 cm	48 cm	45 cm	42 cm	54 cm	51 cm	55 cm	53 cm	51 cm
	12°	42 cm	41 cm	45 cm	41 cm	38 cm	-	-	-	-	-
	15°	40 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Breite Greifreifen unten (min. – max.)		68 – 74 cm	70 – 73 cm	71 – 83 cm		71 – 84 cm	73 – 83 cm	73 – 85 cm	76 – 86 cm		76 – 90 cm
Höhe Fußplatte – Mitte Kniepelotten		19 – 30 cm		28 – 36 cm			34 – 44 cm		42 – 51 cm		
Höhe Fußplatte – Aufnahme Gesäßpelotte		26 – 42 cm		43 – 58 cm			53 – 69 cm		65 – 80 cm		
empfohlen bei Schrittlänge		30 – 47 cm		48 – 63 cm			58 – 74 cm		70 – 84 cm		
Abduktion geteilte Fußstützen		0° – 6°					0° – 30°				
Abduktion geteilte Fußstützen (bei abduziertem Grundmodell)		0° – 40°					-		-		
Beckentiefe*		11 – 24 cm					15 – 28,5 cm				
Beckentiefe** (Verstellbereich der Beckenposition per Handkurbel max. 6 cm)		11 – 20 cm (+6 cm)					15 – 27 cm (+6 cm)				
Sternumhöhe (Höhe Fußplatte – Mitte Brustpelotte)		54 – 80 cm		68 – 101 cm			92 – 123 cm		111 – 140 cm		
Tischhöhe von Fußplatte		43 – 66 cm		61 – 79 cm			72 – 96 cm		92 – 110 cm		
max. Belastung		30 kg		45 kg			65 kg		80 kg		
Gewicht		28 kg		31 kg			38 kg		42 kg		
HMV-Nr.		28.29.01.3011									

* mit Gesäßpelottenaufnahme (Standard) ** mit Gesäßpelottenaufnahme (abklappbar)



Weitere Infos zum Zubehör findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.



GMFCS
Level III-V

Ich bin dein persönlicher Stehtrainer.

Mit mir kannst du üben, auf eigenen Füßen zu stehen. Zusammen machen wir deine Muskeln fit, stärken deine Knochen und bringen deinen Kreislauf richtig in Schwung. Keine Angst, ich halte dich die ganze Zeit. Auch wenn du dich nach vorne oder hinten lehnst – denn ich bin sogar in der Neigung veränderbar. Alles an mir kann in der Höhe, Tiefe oder im Winkel ganz genau auf dich eingestellt werden.







Kopfstütze
bietet zusätzlichen Halt.

Brustpelotte mit Seitenführung
stabilisiert den Oberkörper.

Therapietisch
für therapeutische und
spielerische Zwecke.

Beckenrahmen
für eine optimale Aufrichtung und
einen einfachen Transfer.

Beckenanlage
vermittelt ein sicheres Gefühl.

Handkurbel
ermöglicht langsame Aufrichtung und
Streckung im Knie- und Beckenbereich.

Flexible Knie-Positionierer (FKP)
dreidimensional verstellbar, mit
einstellbaren Anlagebändern.

Mittelsäule
stufenlos veränderbar von
15° Rücklage bis zu 30° Vorlage.

Geteilte Fußplatte
anpassbar an
individuelle Anforderungen.

Rahmengenometrie
für ein Zusammensein mit anderen
Kindern auf Augenhöhe.

Laufrollen mit Totalfeststellung
verhindern ein ungewolltes Wegrollen.



**Für therapeutische oder
spielerische Zwecke kann
man meinen Holztisch mit
oder ohne veränderbarer
Armauflage, Mulde oder
Abdeckung bestellen.**

**Rahmenfarbe
Gr. 1**

 Melonengelb

**Rahmenfarbe
Gr. 2**

 Dormant Rot

**Rahmenfarbe
Gr. 3**

 Lasuritblau metallic

Der Beckenrahmen hilft dir, dich optimal aufzurichten. Mithilfe einer Kurbel können deine Eltern oder eine Begleitperson den Rahmen horizontal verschieben, sodass du dein Becken langsam strecken kannst.



Flexible Knie-Positionierer (FKP)
sind einzeln dreidimensional verstellbar. In der Länge einstellbare Anlagebänder passen sich optimal an die Form des Knies an.

Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Körpergröße	75 – 110 cm	100 – 140 cm	120 – 160 cm
Tischhöhe von Fußplatte	48,5 – 80,5 cm	71 – 95 cm	80 – 112 cm
Beckentiefe	12 – 22 cm	16 – 28 cm	20 – 35 cm
Tiefeneinstellung des Beckenrahmens (per Handkurbel)	6 cm		
Länge Gesamt	84 cm	90 cm	100 cm
Breite Gesamt	57 cm	65 cm	71 cm
Abduktion geteilte Fußstützen	0° – 27°		
Beckenhöhe	45 – 60 cm	57 – 80 cm	65 – 90 cm
Sternumhöhe	55 – 85 cm	75 – 110 cm	95 – 125 cm
max. Belastung	40 kg	60 kg	80 kg
Gewicht	27 kg	29 kg	32 kg
HMV-Nr.	28.29.01.1059		



Weitere Infos zum Zubehör findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.



GMFCS
Level IV-V

kg
max. 84



71–165 cm

0° – 90°



Ich bin dein vielseitiger Stehtrainer!

Denn ich vereine viele Funktionen in einem Hilfsmittel: Mit mir erhältst du Unterstützung von vorne, von hinten oder ganz so, wie du es brauchst: Das macht mich zu deinem universellen Begleiter in allen Lebenslagen.

Begegne deinen Freunden während des Stehtrainings auf Augenhöhe und genieße das gemeinsame Spielen – ich halte dich!





rifton stander. supine

Schiebebügel für Begleitpersonen
mit Kippauslöser.

Armauflage
zur Positionierung der Arme.

Hauptsäule
per Gasdruckfeder im Winkel verstellbar.

Kniepelotten
mit Patella-Aussparung.

8" Reifen
feststellbar.

Kopfstütze
tiefenverstellbar.

Thoraxpelotten
abklappbar für einfachen Transfer.

Beckengurt
gibt die nötige Sicherheit.

Fußstützen
unabhängig schwenk- und neigbar und
mit magnetischem Schnellverschluss.



Variable Einstellmöglichkeiten
Beine können individuell in Länge,
Hüft- und Kniewinkel eingestellt
werden.



Abklappbare Thoraxpelotten
bieten aufrechten, stabilen Halt und
ermöglichen einfachen Transfer.



Rahmenfarbe
Gr. 1



Rot (RED)

Rahmenfarbe
Gr. 2+3



Blau (BLU)



Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3 ^{neu}
Länge gesamt	81,5 cm	99 cm	109 cm
Breite gesamt	53,5 cm	68,5 cm	73,5 cm
Höhe der horizontalen Körperstütze über dem Boden	56 - 71 cm	56 - 91,5 cm	60 - 96,5 cm
Höhe Fußstütze bis Knie	15 - 28 cm	25,5 - 38 cm	31 - 48 cm
Höhe Knie bis Hüfte	15 - 25,5 cm	20,5 - 33 cm	30,5 - 44 cm
Fußstütze bis zur Oberkante der Kopfstütze	78,5 - 109 cm	104 - 139,5 cm	124,5 - 169 cm
Breite zwischen den Rumpfseitenteilen	12,5 - 25,5 cm	18 - 28 cm	23 - 35,5 cm
Breite zwischen den medialen / lateralen Oberschenkelauflagen	5 - 10 cm	7,5 - 12,5 cm	10 - 14 cm
Gewicht des Grundmodells	23,5 kg	35,5 kg	52 kg
Körpergröße	71 - 106 cm	96 - 134 cm	122 - 165 cm
max. Belastung	34 kg	45 kg	84 kg

Die Abduktion, die bei jedem Bein bis zu 30 ° möglich ist, fördert die gesunde Entwicklung der Hüfte.



Weitere Infos zu Zubehör und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



Theo ist eine Wasserratte. Er genießt das prickelnde Gefühl von Wasser auf seiner Haut. Dabei hilft ihm der **hts.** richtig zu entspannen. Auch unsere anderen Badhilfen sind immer zur Stelle und begleiten dich bei allem, was du im Badezimmer vorhast.



Wasser marsch!





Puh, das hat Spaß gemacht! Den ganzen Nachmittag war Theo mit seinen Schwestern auf dem Spielplatz und hat mit ihnen Traumschlösser aus Sand gebaut. Jetzt ist aber Zeit für eine Dusche. Da Theo nicht stehen kann, unterstützt ihn im Bad seine Hygienehilfe hts., wo sie nur kann. Na dann, Wasser marsch!

Körperpflege wie Duschen, Baden, Zähneputzen und Toilettengänge gehören zu den Dingen, die ein Mensch im Badezimmer tagtäglich erledigt. Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen schaffen es nicht alleine, sich um ihre Körperhygiene zu kümmern. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Damit Kinder die tägliche Pflege im Bad leichter akzeptieren und auch Eigenständigkeit zum Beispiel beim Toilettengang erreichen können, gibt es Hygienehilfen für unterschiedliche Anforderungen. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie bieten den Kindern genügend Unterstützung und Sicherheit und erleichtern Eltern oder Begleitpersonen den Alltag.

Manchmal kann man gar nicht genügend Hände haben, um ein Kind beim Waschen in der Badewanne oder Dusche sicher zu stützen. Daher sind Hilfsmittel das A und O, um dem Kind ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Viele Einstellungen können hier nämlich mit nur einer Hand vorgenommen werden. Auch Zubehör wie Gurte oder Pelotten tun ihr übriges für einen sicheren Halt. Mit dem richtigen Hilfsmittel bleibt also immer eine Hand frei, das Kind oder den Jugendlichen zu halten und ihm ein sicheres Gefühl zu geben.

Zum Mitnehmen, bitte!

Unsere Hygienehilfen sind mit allen Wassern gewaschen, um es den Kleinen und Großen so sicher und angenehm wie möglich zu machen. So sind beispielsweise die Bezüge besonders hautfreundlich und hinterlassen keine Druckstellen am Körper. Sich auf den gepolsterten Sitzen mit ihren weichen Materialien abrausen zu lassen, fühlt sich angenehm und gar nicht kalt an.

Und das Beste kommt zum Schluss:

Unsere Hygienehilfen lassen sich sogar einfach mal mitnehmen – zum Beispiel für das Wochenende bei den Großeltern. Manche Hilfen sind extra klein, kompakt und faltbar, andere bieten ein spezielles Reiseuntergestell.

Bad + Toilette.



boris.
148–151



hts.
152–155



wave.
156–159



basti.
160–163



bibi.
164–165

GMFCS
Level III-V


kg
max. 150




26–46 cm


31–48 cm


(-)5° – 30°



Ich bin dein komfortabler Dusch- und Toilettenstuhl.

Ob Zähneputzen oder Duschen, meine Sitzneigung lässt sich an jede Situation anpassen. Meine anatomisch geformte Sitzfläche verleiht dir den nötigen Halt, stabilisiert deinen Oberkörper und kann in der Höhe verändert werden. Noch komfortabler sitzt du auf meinen Einlegepolstern. Diese lassen sich ganz einfach entnehmen und superleicht reinigen. Da ich aus einem sehr robusten Material gefertigt wurde, haben du und deine Eltern lange Freude an mir. Wusstest du, dass es mich in fünf Größen gibt und ich bis zu 150 Kilo tragen kann?



**Auf dem herausnehmbaren,
optionalen Sitzpolster**
sitzt du richtig bequem.




**Schwenkbare
Armauflagen**
stabilisieren dich
zusätzlich.





Toiletteneinrichtung

Mich kannst du unabhängig von einem WC als Toilettenstuhl nutzen.

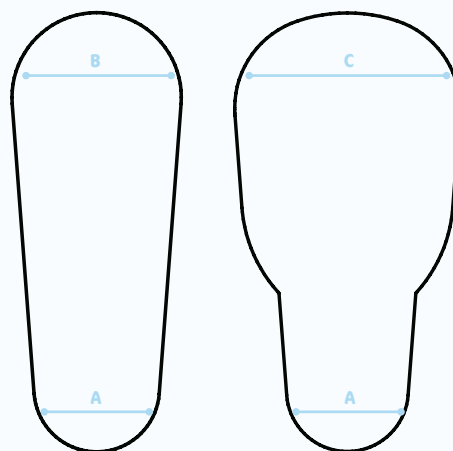

In den Größen 2–4 gibt es auch eine größere Hygieneöffnung.



Daten		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Sitzbreite (hinten)		26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Sitztiefe		31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Schalenbreite (vorne)		31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Rückenhöhe		49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Sitzwinkel		(-)5° - 30°				
Überfahrbare Toilettenhöhe		47 - 57 cm	45 - 55 cm	42 - 52 cm		
Breite gesamt		56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
Länge gesamt		65 cm			70 cm	
max. Unterschenkelänge		38 cm		48 cm		
Vorderkante Hygieneöffnung bis Hinterkante Untergestell		47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Breite Öffnung vorne	A	10 cm				
Breite Öffnung hinten	B	12 cm		13,5 cm		
Breite Öffnung hinten*	C	-	-	18,5 cm		
max. Belastung		60 kg	80 kg	100 kg		150 kg
Gewicht		28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg
HMV-Nr.		33.40.04.1014				

* gilt nur für die Größen 2b, 3b und 4b



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-Vkg
max. 113

20–43 cm

20–44 cm

(-)6°–18°

(-)5°–25°

**Ich bin dein Dusch- und Toilettenstuhl und ein absoluter Wasser-Fan!**

Mit meinen vielen verschiedenen Untergestellen begleite ich dich bei allem, was du im Badezimmer erledigen möchtest – ob Transfer, beim Einsatz als Toilettenstuhl oder in der Dusche. Mein Rücken lässt sich vom Winkel her genau auf dich einstellen, sodass du dich prima nach vorne und hinten beugen kannst. Da ich mit meinen unterschiedlichen Untergestellen sehr vielfältig bin, kann ich mich an jede Räumlichkeit anpassen und dich perfekt unterstützen.

**Blaue Knöpfe**

zeigen die Stellen, an denen man Höhe, Tiefe oder Winkel verändern kann – und das ganz ohne Werkzeug.

Veränderbarer Sitzwinkel in jeder Höhe.



Aufnahmebügel

Damit kann die Sitzeinheit auf jeder Toilette einfach montiert werden.

Der Bügel kann dauerhaft verbleiben, ohne die Nutzung einzuschränken.



Verschiedene Untergestelle für jede räumliche Umgebung.



fahrbares Untergestell



feststehendes Untergestell



Badewannenuntergestell



Transfer- und Pflegeuntergestell

Rückenwinkel

lässt sich von (-)6° bis 18° einstellen.

Thoraxpelotte

bietet mehr Stabilität.

multifunktionale Sitzeinheit

lässt sich in der Sitztiefe anpassen.

Sitzpolster

mit zwei Öffnungsvarianten. Auch als geschlossene Version erhältlich.

Untergestell

kann in Höhe und Winkel angepasst werden.

Laufrollen

ermöglichen einen unkomplizierten Transfer.

Kopfstütze

lässt sich in Höhe, Tiefe und Winkel einstellen.

abnehmbare Polster

lassen sich leicht reinigen.

Armlehne

bietet nötigen Halt.

Oberschenkelführung

bietet nötigen Halt.

Abduktionskeil

führt die Beine.

Fußbank

vielfältig einstellbar und hochklappbar für leichten Transfer.

Abnehmbarer Tisch

mit gepolsterter Bauchanlagefläche. Diese bietet eine Armauflage und Stimulation beim Toilettengang.

**Toiletteneinrichtung**

Mich kannst du unabhängig von einem WC als Toilettenstuhl nutzen.

**Reise-Basis hts.**

Nimm mich in der dazugehörigen Tasche doch einfach mit.





Daten		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Breite	fahrbare Untergestelle	53 cm		57 cm
	feststehende Untergestelle	51 cm		53 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	67 cm		71 cm
Sitzhöhe	fahrbare Untergestelle	39 - 55 cm		44 - 58 cm
	feststehende Untergestelle	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	51 - 78 cm		
Sitzbreite		20* / 25* / 30 cm	25* / 30* / 36 cm	33* / 38* / 43 cm
Sitztiefe		20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Höhe Armlehne		13,5 cm	17 cm	20 cm
Rückenbreite		29 cm	34 cm	41 cm
Unterschenkellänge Toilettensitz		22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
Rückenhöhe		42 cm	50 cm	62 cm
max. überfahrbare Toilettenhöhe	fahrbare Untergestelle	52 cm		52,5 cm
	feststehende Untergestelle	38 cm		42 cm
Länge	fahrbare Untergestelle	74 cm		81 cm
	feststehende Untergestelle	71 cm		74 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	84 cm		87 cm
Vorderkante Hygieneöffnung bis Hinterkante der fahrbaren Untergestelle		48 cm		
Rückenwinkel		(-) 6°, 6°, 18°		
Sitzwinkel	(-) 5° - 25°			
	(-) 15° - 15°			
max. Belastung		34 kg	68 kg	113 kg
HMV-Nr.		33.40.01.4005 (Nutzung als Toilettenaufsatz) / 33.40.04.1008 (Nutzung als Toilettensstuhl)		

* einstellbar mittels optionaler Oberschenkelführung



**Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen**
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-V

Ich bin deine universelle Bade- und Duschliege.

Auf meiner bequemen Sitzfläche kannst du dich richtig gut entspannen. Dabei kann man meinen Rücken so einstellen, wie es für dich am besten passt – sogar direkt beim Baden. Damit du dich auch immer sicher fühlst, gibt es verschiedene Gurte für die Brust, das Becken oder die Beine. Eine Kopfstütze darf natürlich auch nicht fehlen. Mich kannst du mit oder ohne Wadenauflage bekommen. Mein Transferuntergestell unterstützt dich optimal beim Duschen über der Badewanne.



Badewannenuntergestell


bringt dich auf die passende Höhe und schont den Rücken deiner Eltern.



Duschuntergestell

mit breiten und bremsbaren Laufrollen kann auch für den Transfer genutzt werden.



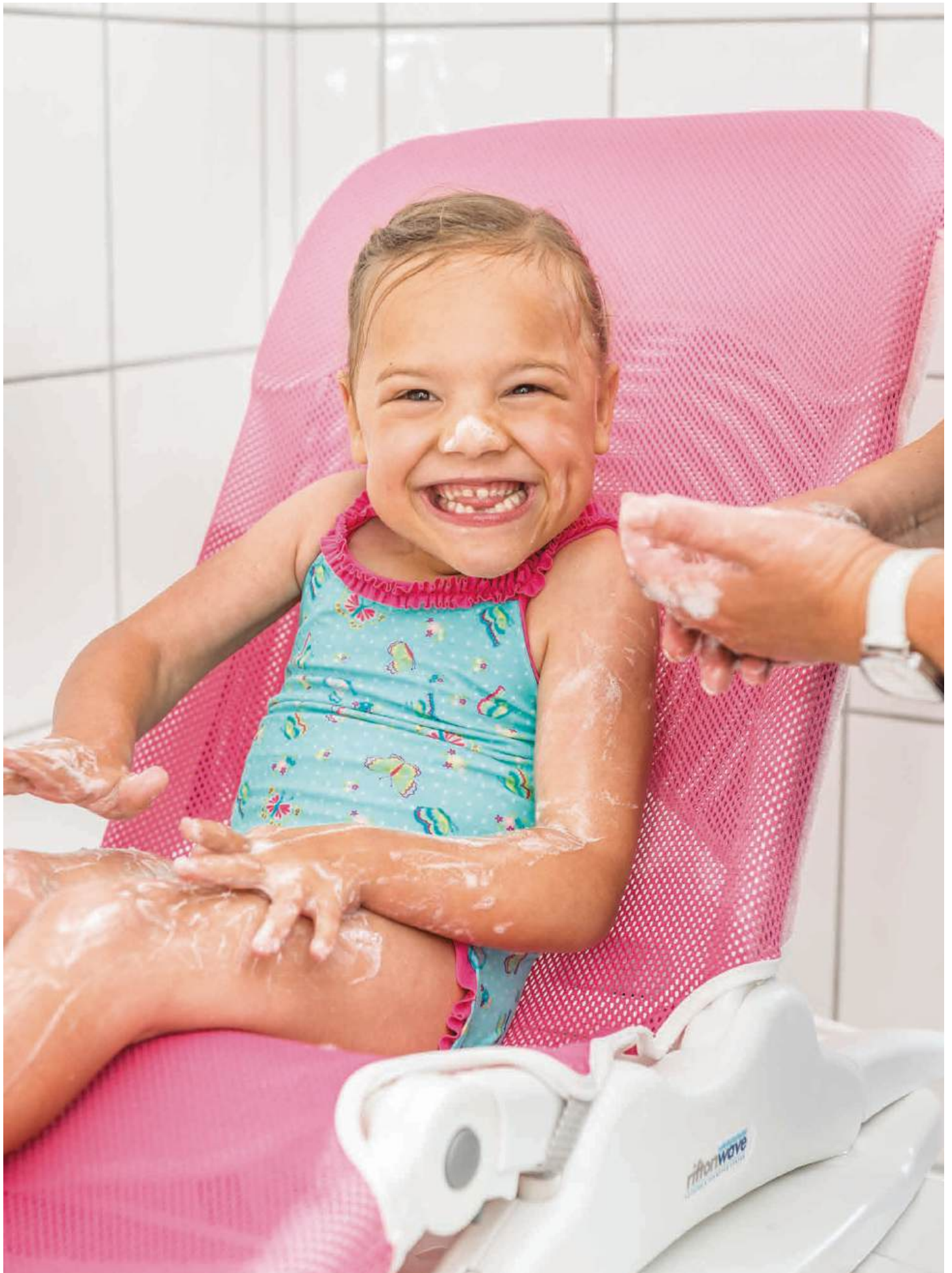

Kopfstütze

kann in Höhe und Breite angepasst werden.

abnehmbarer Bezug

für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung in der Waschmaschine.

Kunststoffuntergestell

lässt sich in der Höhe verändern.

Stützfüße

sind in der Höhe veränderbar.

**Brustgurt**

gibt Sicherheit und Stützung. Er ist mit und ohne einstellbarer Seitenführung erhältlich und kann auch als Beckengurt genutzt werden.

optionaler Beingurt

wird per Klettverschluss passend eingestellt.

optionale**Wadenauflage**

ist während der Pflege veränderbar.

Rückenwinkel

lässt sich einhändig verändern.

**Winkel der Wadenauflage und Sitzfläche**

lassen sich unabhängig voneinander auch während der Pflege verändern – damit du stabil und angenehm sitzen oder auch liegen kannst.



Rahmenfarbe

☐ Weiß



Transferuntergestell
ist faltbar und platzsparend.

Mit dem Transfergestell unter mir kann ich dich mühelos über der Badewanne positionieren und mich dabei sogar um 90° drehen. So macht Duschen erst richtig Spaß!



Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Sitztiefe	27 cm	33 cm	43 cm
Sitzbreite	38 cm		44 cm
Rückenhöhe	58 cm	67 cm	81 cm
Sitzhöhe	5 cm / 18 cm		
Sitzhöhe mit Badewannenuntergestell	32 - 47 cm		
Sitzhöhe mit Duschuntergestell	70 cm		
Sitzhöhe mit Transferuntergestell	53 - 75 cm		
Länge Badeliege, komplett flach, ohne Wadenauflage	89 cm	104 cm	128 cm
Länge Badeliege, komplett flach, mit Wadenauflage	108 cm	124 cm	155 cm
Breite	46 cm		53 cm
Länge, komplett flach	75 cm		
Höhe Badewannenuntergestell	20 cm		
Länge Badewannenuntergestell	99 cm		
Breite Badewannenuntergestell	44 cm		
Höhe Duschuntergestell	56 cm		
Breite Duschuntergestell	69 cm		
Länge Duschuntergestell	86 cm		
max. Belastung	34 kg	68 kg	114 kg
Rücken- und Sitzwinkel	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°		
HMV-Nr.	04.40.04.0007		



**Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen**
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level III-V



Ich bin deine vielfältige Bade- und Duschliege.

Ich passe mich ganz deinen Bedürfnissen an, ob im Badezimmer, am Meer oder auch am Strand. Auf meiner Liegefläche liegst du immer sicher und bequem. Mein Bezug ist bis 30 °C waschbar, besonders hautfreundlich und hinterlässt keine Druckstellen an deinem Körper. Da du mit mir sehr tief in der Badewanne sitzen kannst, spart man beim Baden sehr viel Wasser. Praktisch, oder? Praktisch ist auch, dass man meinen Rückenwinkel während der Nutzung einhändig verstellen kann – so ist eine Hand immer ganz bei dir!



**Dank des im Winkel
veränderbaren Kopfteils**
läuft dir kein Wasser in die Augen.



Kopfteil

ist mühelos abklappbar.

Kopfführungspolster

ist in Höhe und Breite einstellbar.

Bezug

kann zum Reinigen abgenommen werden.

Rückenlehne

kann von 90° bis 180° eingestellt werden.

Brustgurt

gibt sicheren Halt.

Kniewinkelverstellung

bietet eine bequeme Sitzposition.

optionale Beckenmulde

stabilisiert und positioniert das Becken, mit einstellbarer Tuberkanke.

Unterschenkelauflage

kann zwischen 0° und 90° eingestellt werden.

Untergestell

für die Dusche.

**Beckenmulde**

optional steht auch ein Bezug mit integrierter Beckenmulde zur Verfügung.

Rückenwinkel

kann während der Nutzung einhändig eingestellt werden.



Bei Größe 4 erfolgt die Verstellung über zwei Edelstahlrastergelenke.





Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Sitzbreite	30 cm	35 cm		40 cm
Sitztiefe	30 cm	34 cm	38 cm	44 cm
Rückenhöhe	45 cm	61 cm	71 cm	82 cm
Länge Standfläche	69 cm	74 cm	88 cm	93 cm
Unterschenkellänge	19 cm	20 cm	28 cm	
Rückenwinkel	90° - 180°			
Kniewinkel	0° - 90°			
Kopfstützwinkel	0° - 90°			
Kopfstützwinkel	0° / 5 cm			
max. Belastung	35 kg	45 kg	55 kg	75 kg
Gewicht	4 kg	4,1kg	4,3kg	4,8kg
HMV-Nr.	04.40.04.0006			

* in Kombination mit dem Bezug mit Beckenmulde



Weitere Infos zu Zubehör
und Begurtungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



GMFCS
Level II-IV



Rückenlehne
kann von 90° bis 180° ein-
gestellt werden.

Beckengurt
bietet sicheren Halt.

Sitzfläche
formt sich den
Proportionen an.

Ich bin dein mobiler Badesitz. Ich habe richtig Lust, mit dir Baden zu gehen. Aber nicht nur das: Ich freue mich auch, mit dir gemeinsam im Sandkasten Burgen zu bauen. Das Haar voller Sand, die Hände ganz schmutzig – da haben wir uns eine Dusche verdient! Meine Rückenlehne lässt sich so verstellen, dass du mit mir kerzengerade sitzen oder dich ganz entspannt zurücklehnen kannst. Übrigens: Ich bin so leicht und kompakt, dass man mich ganz einfach zusammenklappen kann. Das ist praktisch, wenn ich dich auf Reisen oder zu Freunden begleite.



Rückenwinkleinstellung
bringt deinen Rücken in die
gewünschte Position.





Daten	bibi.	bibi. mit langem Rücken
Sitztiefe	30 cm	
Sitzbreite	36 cm	
Höhe Rücken	45 cm	55 cm
Länge gesamt	60 cm	
Rückenwinkel	90° - 180°	
max. Belastung	30 kg	
Gewicht	2,3 kg	
HMV-Nr.	04.40.04.1xxx	

Aluminiumgestell
 Ich kann platzsparend und
 mühelos zusammengeklappt
 werden.



Weitere Infos zu Zubehör
 und Begutungen
 findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
 und schau dir direkt auf
 unserer Homepage Videos
 zum Produkt an.



Allgemeine Hinweise.



Schau mal, der Fleck ist weg.



„Jetzt wischen wir das Tischlein rein und **tim.** wird bald schon sauber sein.“ Nicht nur **tim.**, all unsere Hilfsmittel lassen sich superleicht von Schmutz befreien. Auf den folgenden Seiten erklären wir, wie sie gereinigt und genutzt werden sollen. Aber noch viel spannender: Such dir aus unserer großen Auswahl an Stoffen und Farben dein Lieblingsmuster aus!

Einführung in die Nutzung unserer Produkte.

Bitte beachten Sie, dass **Menschen mit geistiger, Lese- oder Sehbehinderung** sich unsere technische Dokumentation von Eltern, Betreuungsperson oder technischem Berater vorlesen bzw. erklären lassen müssen, um eine sichere Anwendung unserer Produkte gewährleisten zu können.

Wir weisen darauf hin, dass ausschließlich **Ersatzteile und Zubehör** aus unserem Hause verwendet und verbaut werden dürfen, um die Sicherheit des Nutzers nicht zu gefährden. Im Einzelfall bedürfen Kombinationen mit Produkten anderer Hersteller der Abklärung durch den Fachhandel oder mit uns, als Hersteller.

Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im einstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Für den Transport ist das jeweilige Produkt auf die kompaktesten Maße zu verstellen. Stellen Sie beispielsweise Sitz, Armlehnen, Rücken etc. auf die niedrigsten Maße. Entfernen Sie Teile des Produktes, die einfach zu demontieren sind, wie z. B. die Räder beim Stehtrainer **todd.**, den Lenker beim **momo dreirad.** etc. Klappen Sie bei Produkten mit Fußbank diese hoch.

Detaillierte Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des einzelnen Produkts.

Gebrauchsanleitungen zu den jeweiligen Produkten stehen unter www.schuchmann.de/mediathek zur Verfügung.

Gegebenenfalls sind **produktspezifische Reinigungshinweise** aus den jeweiligen Gebrauchsanleitungen zu berücksichtigen.

Reinigungsmaßnahmen nach Materialart.

Die Pflege und Reinigung von unseren Produkten sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, um eine Funktionsfähigkeit über die Nutzungsdauer zu gewährleisten. Dabei ist die Wahl der geeigneten Reinigungsmittel entscheidend.

Holz: Holzteile sind nebelfeucht mit einem Tuch o.Ä. zu reinigen. Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmitteln die Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind ungeeignet. Das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht (d.h. mit ausgewringenen Tüchern) wischen und pflegen. Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle vornehmen.

Pulverbeschichtete Teile: Aluminiumteile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen.

Edelstahl: Edelstahlteile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlauge zu reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

Bezüge / Stoffteile: Bezüge bzw. Stoffteile sind unter Verwendung von handelsüblichem Waschmittel bei 40 °C in der Waschmaschine zu reinigen und dürfen nicht im Trockner getrocknet werden.

Kunststoffe: Kunststoffe sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlauge zu reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

PU (Polyurethane): PU-Teile sind unter Verwendung von einem Schwamm oder feuchtem Tuch mit milder Seifenlauge zu reinigen. Es dürfen keine Bleichmittel verwendet werden.

Bei Fragen wende
dich gerne direkt
an uns!



Desinfektionsmaßnahmen nach Materialart.

Zur **Flächendesinfektion** der **Metall-, Holz- und Kunststoffteile** können verschiedene Produkte eingesetzt werden. Die eingesetzten Desinfektionsmittel sollten **eine breite Wirksamkeit** (min. bakterizid und levurozid, ggf. viruzid) aufweisen und für Medizinprodukte zugelassen sein.

Geeignete Desinfektionsmittel können Sie der VAH-Desinfektionsmittelliste entnehmen. Es ist darauf zu achten, dass Desinfektionsmittel verwendet werden, welche selbst ein Medizinprodukt sind.

Andere Desinfektionsmittel sind für die Desinfektion von Hilfsmitteln nicht zugelassen.

Flüssige Desinfektionsmittel gibt es als fertige Lösung, die aufgesprüht und mit einem weichen Tuch gleichmäßig aufgetragen werden. Alternativ können auch **mit Desinfektionsmittel vorgetränkte Tücher** verwendet werden, mit denen die Produkte flächendeckend abgewischt werden. In beiden Fällen muss auf eine vollständige Benetzung geachtet werden. Die **Einwirkzeiten** können variieren und sind den Herstellerangaben der verwendeten Mittel zu entnehmen. Es sollten jedoch keine Mittel verwendet werden, die alkoholbasiert sind.

Zum Zweck des Arbeitsschutzes können Desinfektionsanlagen verwendet werden. Dort werden die kontaminierten Geräte komplett hineingeschoben und durch Kaltvernebelung desinfiziert. Methoden der Desinfektion durch Vereisung sind nicht erlaubt.

Gegebenenfalls sind **produktspezifische Desinfektionshinweise** aus den jeweiligen Gebrauchsanleitungen zu berücksichtigen.

Hygienemaßnahmen für sämtliche Produkte.

1. Wer sollte die Hygienemaßnahmen durchführen?

Anwender bzw. Begleitpersonen selbst, Service-Mitarbeiter des Fachhandels und andere autorisierte Einrichtungen.

2. Und wie regelmäßig?

- Reinigung: Regelmäßig und bei Bedarf (bei Verschmutzungen)
- Reinigung & Desinfektion: Regelmäßig und bei Bedarf (bei möglicher Kontamination und vor Wartung und Instandhaltungsmaßnahmen)
- Nach der Reinigung & Desinfektion: Beschädigte Untergestelle oder Komponenten müssen entfernt oder instandgesetzt werden.
- Vor dem Wiedereinsatz: Aufbereitung durch geschultes Personal (intensive Reinigung und Desinfektion). Es wird empfohlen, die Polster und Bezüge auszutauschen!

3. Womit sollte man dabei arbeiten?

Das Tragen von **Schutzhandschuhen** (z. B. aus Nitril oder Butylkautschuk) wird empfohlen! Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in Bowdenzüge, Rahmenrohre o. Ä. Beseitigung von sichtbaren Verschmutzungen mit feuchtem Schwammtuch und ggf. einem Reinigungsmittel. Keine scheuernden Mittel oder Hilfsmittel verwenden!

4. Wie geht man dabei genau vor?

Zur Reinigung werden alle zugänglichen Oberflächen mit einem feuchten Schwammtuch und ggf. einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt. Im Anschluss werden die Oberflächen mit einem Baumwoll- oder Einmaltuch getrocknet. Schwer zugängliche Stellen können auch mit einem Fön auf niedriger Temperaturstufe getrocknet werden. Der Einsatz von Hochdruckreinigern ist nicht erlaubt, da der Einsatz zu Beschädigungen an den Produkten führen kann. Zur Desinfektion sollte das verwendete Desinfektionsmittel nach Herstellerangabe angewendet werden. Auf **vollständige Benetzung** achten. Ggf. überschüssige Präparatemenngen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen. Besonders wichtig ist, die Einwirkzeiten der Hersteller zu beachten!





Jetzt wird's bunt.





Kreiselrund und kugelbahnbunt – lass' uns spielend die Welt entdecken!

So stellen sich auch unsere Stoffe auf. Mit allen üblichen Qualitätsansprüchen, die man an die Hilfsmittelversorgung nur stellen kann.

Gut zu wissen – alle unsere Stoffe sind:

- einfach und leicht zu verarbeiten
- hoch scheuerbeständig
- schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1+2
- hautverträglich nach DIN EN ISO 10993-5
- erfüllen die Anforderungen der MDR für Sitzschalen und Sonderbauten



Bei Interesse schicken
wir dir gerne eine
Stoffmustermappe zu!



Flexi.



9001043 (Nr. 43)



9001044 (Nr. 44)




9001050 (Nr. 50)

Gewebe.



9001123 (Nr. 123)

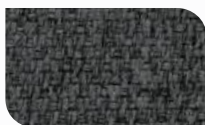

9001124 (Nr. 124)



9001127 (Nr. 127)

Gewirke.



9001091 (Nr. 91)



9001092 (Nr. 92)



9001105 (Nr. 105)



9001106 (Nr. 106)



9001111 (Nr. 111)*



9001112 (Nr. 112)*



9001114 (Nr. 114)*



9001115 (Nr. 115)*



9001113 (Nr. 113)**



Noch cooler: Lass auf das Rückenpolster deiner Sitzhilfe deinen Namen sticken. Alle Stoffe, außer Flexi, können mit maximal zwölf Buchstaben in Silber-Weiß bestickt werden. Da werden deine Freunde staunen.



Kunstleder.



9001190 (Nr. 191)**



9001192 (Nr. 192)**



9001193 (Nr. 193)**

Netzware.



9001046 (Nr. 46)*

Abstandware.



9001047 (Nr. 47)



9001048 (Nr. 48)*



9001101 (Nr. 101)




9001109 (Nr. 109)

Hinweis:

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Die Abbildungen der Produkte und Farben dienen lediglich der Orientierung. Abweichungen vom Original sind drucktechnisch nicht auszuschließen. Alle Angaben ohne Gewähr.

*Diese Ware ist nicht DIN EN 1021-1+2 konform. **Auslaufmodell



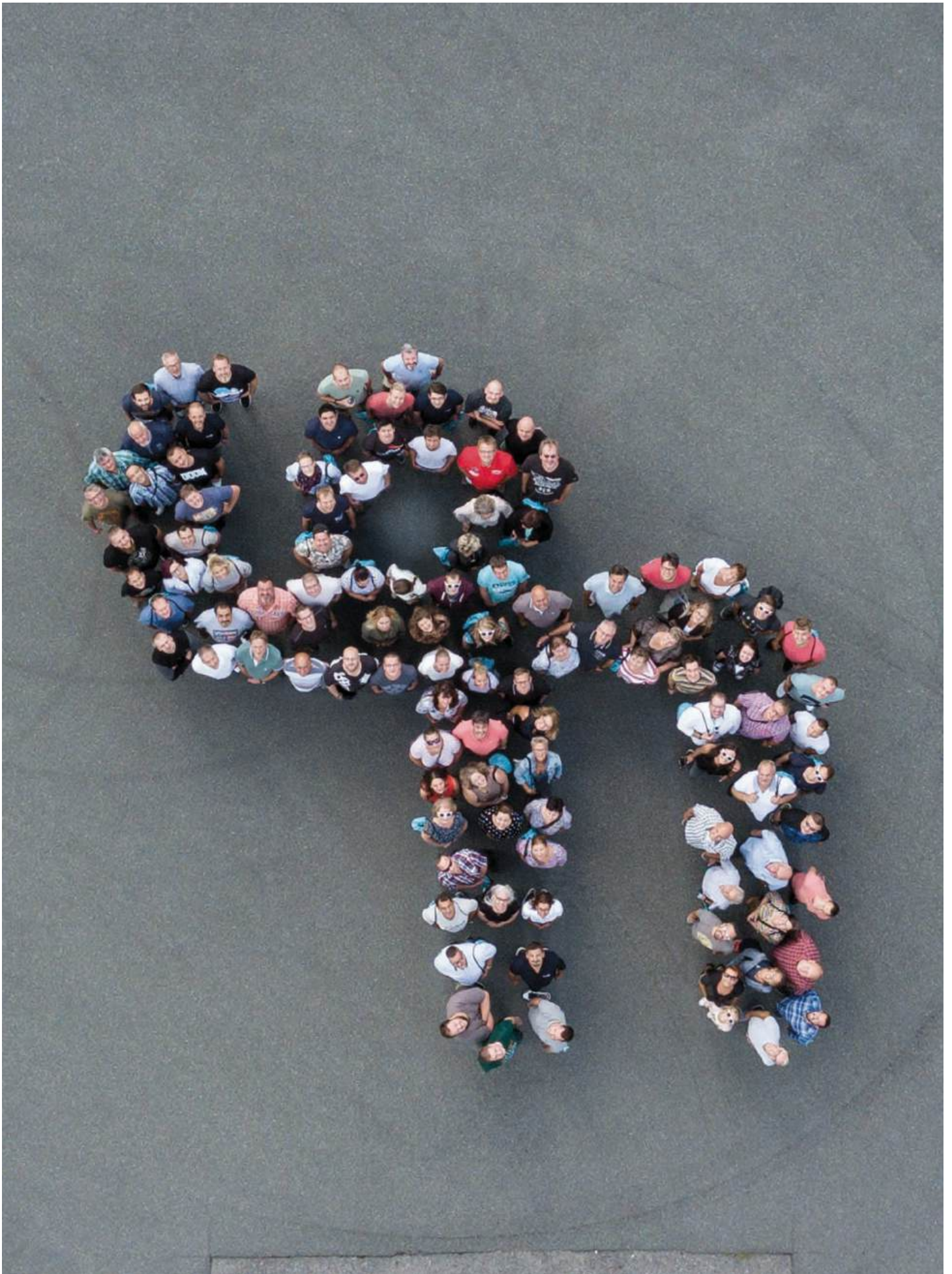

Wir sind schuchmann.

Wir sind ein Teil der internationalen Fördergemeinschaft für Kinder- und Jugend-Rehabilitation.

Seit dem Jahr 2000 engagiert sich die Internationale Fördergemeinschaft rehaKIND e.V. für die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Handicap.

Die Versorgung dieser Kinder mit Therapien und Hilfsmitteln ist ein besonders sensibler Bereich in der Rehabilitation: Interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Beteiligten ist gefordert – Kompetenz sorgt für Vertrauen.

Das Ziel dieser Fördergemeinschaft ist eine Optimierung des Versorgungsprozesses, qualitätsgesicherte Wege und eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Mittel.

Darüber hinaus steht die Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, Organisationen, Wissenschaft und Forschung in der Kinder- und Jugend-Rehabilitation im Fokus.

Als Gründungsmitglied sind uns daher die Zusammenarbeit und der Austausch mit rehaKIND von großer Bedeutung. Über diese Fördergemeinschaft erhalten wir als Hersteller von RehaHilfsmitteln wichtige

Impulse zur qualitativen Verbesserung unserer Produkte. Dies ermöglicht uns, den individuellen Herausforderungen einer modernen Hilfsmittelversorgung gerecht zu werden.

Wir möchten an dieser Stelle rehaKIND für das große Engagement zur Förderung von behinderten Kindern und Jugendlichen danken und freuen uns, ein Mitglied dieser Fördergemeinschaft zu sein.

Weitere Informationen zu rehaKIND finden Sie unter www.rehakind.com.

rehaKIND. Sichert Chancen für alle Kinder.





schuchmann.de