

GMFCS
Level IV-V



Ich bin dein anpassungsfähiges Rückenschrägliegesystem.

Mit mir ist dein Transfer von der liegenden in die stehende Position sicher und komfortabel möglich – auch wenn du nur wenig aktiv mitmachen kannst. Ich passe mich über meine vielfältigen Einstellmöglichkeiten deinen besonderen Körperformen sehr genau an – und das von Kopf bis Fuß.

Regelmäßiges Stehen wirkt sich positiv auf deine Körperstrukturen und -funktionen aus und fördert deine Aktivitäten.

Dabei unterstütze ich dich und biete dir zugleich Sicherheit und Gewichtsübernahme. Mit mir hast du eine neue Perspektive – du bist mit deinen Freunden auf Augenhöhe und kannst mit mir geschoben werden.

So ist die Teilhabe in verschiedenen Situationen und Positionen während des Stehtrainings möglich.

Höheneinstellung

erfolgt ganz einfach via Motor oder mit Gasdruckfederunterstützung.



Wachstumsanpassungen

können leicht über Längenverstellung des Rückens und der Beine vorgenommen werden.










Außerdem kann man meine Höhe und meinen Winkel leicht verstellen. So steht dem Spielen mit deinen Freunden nichts mehr im Wege.



Präzise Kantelung der Liegefläche
ist von 0 – 90° via Gasdruckfeder möglich.



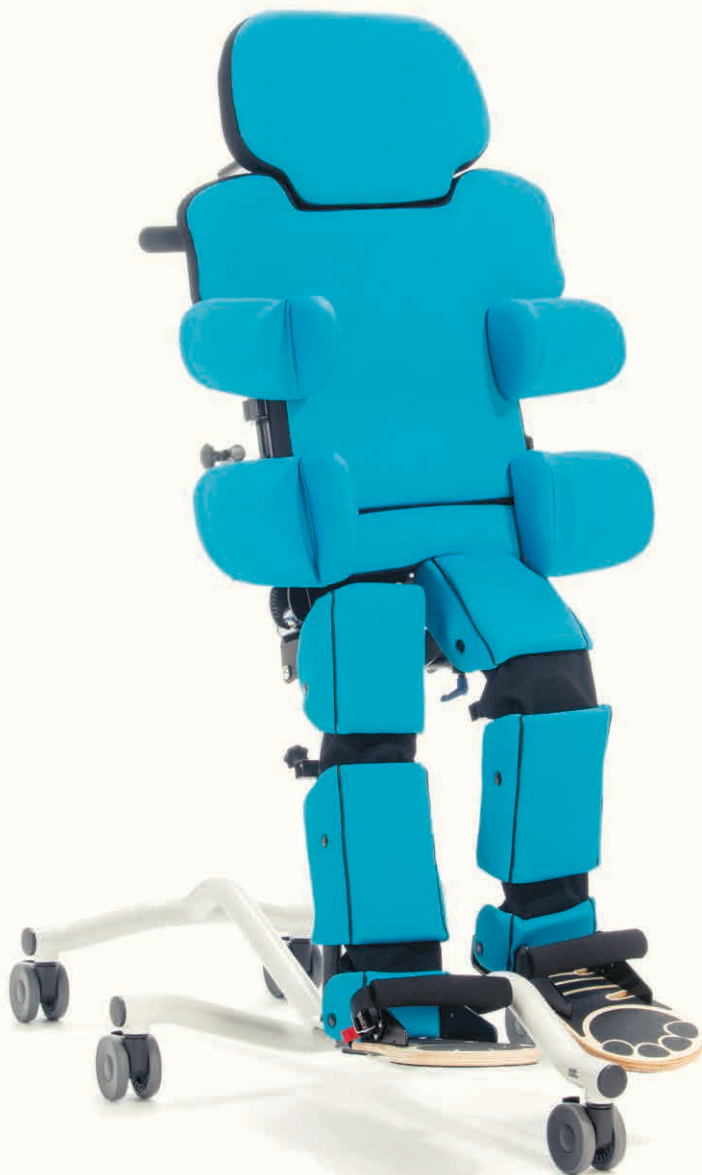

**Kopfstütze mit winkelverstellbarer
Seitenführung**

ist flexibel, praktisch, individuell
anpassbar und bietet einen großen
therapeutischen Nutzen.



Flexible Knie-Positionierer (FKP)

sind einzeln dreidimensional
verstellbar. In der Länge einstellbare
Anlagebänder passen sich optimal an die
Form des Knies an.

Eine optimale Fußposition
wird durch einzeln 3D-verstellbare
Fußstützen erreicht. Diese können bis
auf den Boden herabgelassen werden.



Eine perfekte Beinführung
wird durch längen- und
winkelverstellbare Beine ermöglicht.





Präzise Abduktion der Beine
ist von 0–30° via Stellschraube
möglich.



Daten		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Körpergröße		75 – 115 cm	100 – 135 cm	120 – 160 cm	145 – 185 cm
Rücken	Becken- / Thoraxbreite	14 – 27 cm	17 – 31 cm	20 – 37 cm	27 – 46 cm
	Länge Liegefläche	30,5 – 43 cm	38 – 48 cm	49 – 61 cm	58 – 69 cm
Beine	Sohle bis Knie	20,5 – 30,5 cm	27,5 – 37 cm	32,5 – 45 cm	42 – 54 cm
	Knie bis Schritt	12 – 18,5 cm	16,5 – 24 cm	20 – 29,5 cm	24,5 – 34 cm
	Kniewinkel	0° – 65°			
	Hüftwinkel	0° – 45°			
	Abduktion	0° – 30°			
	Niveausgleich	0 – 5 cm			
Füße	Spitzfuß	0° – 20°			
	Senkfuß	0° – 15°			
	Rotation	0° – 15° je Richtung			
Höhe Liegefläche (für den Transfer)		53,5 – 73,5 cm	60 – 85 cm	71,5 – 93,5 cm	82,5 – 104,5 cm
Kantelung		0° – 90°			
Transportmaße (L x B x H)		95 x 51 x 75 cm	105 x 61 x 85 cm	125 x 76 x 97 cm	152 x 77 x 110 cm
max. Belastung		30 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Gewicht		30 kg	35 kg	80 kg	90 kg
HMV-Nr.		28.2902.1057			



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

