



GMFCS
Level II-IV

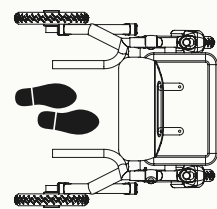

Ich bin deine Anterior-Laufhilfe und helfe dir bereits bei deinen ersten Gehversuchen.

Ich kann's kaum erwarten, mit dir die ersten Runden zu drehen! Dabei unterstütze ich deine Balance und trainiere gleichzeitig deine Rumpfmuskulatur. Meinen Radstand kann man individuell anpassen: Stellt man ihn etwas kürzer ein, dann bin ich sehr wendig und du kannst dich mehr bewegen. Bei einem langen Radstand gebe ich dir mehr Sicherheit und Unterstützung. Wenn es dir nicht so leicht fällt, geradeaus zu gehen, dann unterstütze ich dich gerne mit meinen Richtungsfeststellern.

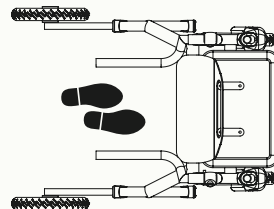



Handgriffe

lassen sich in Höhe und Breite anpassen.

Handbremse

mit extra kleinen Bremsgriffen bei reduzierter Griffweite.

Aluminiumrahmen

super kompakt und in den Größen 2+3 faltbar.

Schleifbremsen an den Hinterrädern

drosseln die Geschwindigkeit, damit du dich voll aufs Gehen konzentrieren kannst.

Ablagekorb

bietet Platz für Spielsachen oder Getränke.

Richtungsfeststeller

unterstützen das Geradeausgehen.

EVA-Reifen

sind widerstandsfähig.


**Dreidimensional einstellbare
Unterarmstützen**
stabilisieren dein Gangbild.
**Optionale Feststell-Handbremsen**

geben dir mehr Sicherheit und Kontrolle – auch in Kombination mit den Unterarmstützen.


**Rahmenfarben
Gr. 0+1**

- Telemagenta (Pink)
- Himmelblau

**Rahmenfarben
Gr. 2**

- Lasuritblau metallic
- Verkehrsrot

**Rahmenfarben
Gr. 3**

- Anthrazit metallic
- Reinweiß



Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Griffhöhe	30 - 47 cm	38 - 59 cm	53 - 75 cm	63 - 88 cm
Höhe Unterarmstützen	41 - 58 cm	49 - 70 cm	63 - 85 cm	73 - 98 cm
Griffabstand	18 - 32 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	36 - 50 cm
Sitzhöhe	25 cm	30 cm	45 cm	
Breite Gesamt	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
Länge Gesamt	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
Länge Gesamt (teleskopierbarer Radstand)	39 - 47 cm	45 - 55 cm	60 - 74 cm	65 - 79 cm
max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
Gewicht	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg
HMV-Nr.	10.46.02.3049			



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

