

GMFCS
Level I-V

kg
max. 100



30-96 cm

16-23 cm

Ich bin dein Therapierad für mehr Balance.

Ich bin für dich da, wenn das Wetter zur Spritztour um den See einlädt. Doch ein Ausflug mit mir kann noch viel mehr. Je nachdem, wie sicher du beim Fahrradfahren bist, lassen sich meine Stützräder von starr auf sehr weich federnd einstellen. Damit trainierst du deine Balance spielend leicht. Außerdem sehe ich wirklich cool aus: Ich bin von einem Fahrrad ohne unterstützende Funktionen kaum zu unterscheiden.





momo therapierad.

Lenker

gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen.

individueller Antrieb

vom starren Antrieb über 7-Gang-Freilaufbremsnabe bis zur elektrischen Unterstützung.

Sattel

gibt es in verschiedenen Formen und Größen.

zwei Bremssysteme

ab 16" bestehend aus Felgen- und Trommelbremse.

Pedale

können individuell konfiguriert werden.

Stützräder

lassen sich von starr bis sehr weich einstellen.

serienmäßig tiefer Einstieg

ermöglicht ein bequemes Aufsteigen und einen eigenständigen Transfer.

Vielfältiges Zubehörprogramm

zur optimalen Unterstützung und individuellen Ausstattung findest du in diesem Katalog.

Du hast die Wahl! Zwischen vielen Lenkern, Sätteln, Fußschalen, Kopfstützen und verschiedenen Antrieben – vom starren Zahnrad bis zur 3-Gang-Nabenschaltung mit Rückfahroption!



Rahmenfarben 12" & 16"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Telemagenta (Pink) / Reinweiß
-  Türkisblau / Reinweiß

Rahmenfarben 20"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Pastellblau / Reinweiß
-  Kiwisorbetgrün / Reinweiß


Rahmenfarben 24" & 26"

-  Fenstergrau / Reinweiß
-  Elfenbein / Reinweiß
-  Schwarz matt / Reinweiß



Dynamische Stützräder

lassen sich an deine Fähigkeiten anpassen. Starr eingestellt, vermitteln sie dir zunächst Sicherheit und Vertrauen. Im Laufe der Therapie lassen sie sich bis zu sehr weich federnden Stabilisierungshilfen verändern. Sie balancieren Kurvenfahrten kinderleicht aus und bieten auch bei unbefestigten Wegen genügend Antriebskraft.

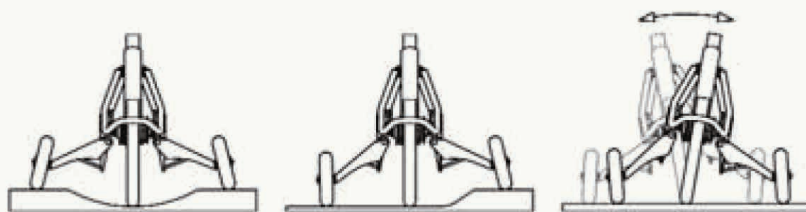

Daten	12"	16"	20"	24"	26"
Pedal bis Oberkante Sattel*	30 - 43 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	58 - 80 cm	70 - 92 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	33 - 40 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	61 - 84 cm	73 - 96 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	39 cm	45 cm	53 cm	58 cm
Radstand	64 cm	76 cm	89 cm	104 cm	112 cm
Länge über Alles	99 cm	122 cm	148 cm	168 cm	178 cm
Einstiegshöhe	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
Breite über Alles	43 cm	52 cm	62 cm	71 cm	76 cm
max. Belastung	35 kg	50 kg	65 kg	100 kg	
Gewicht	10,5 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg
HMV-Nr.	22.51.01.0014				

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.



momo therapierad.

Mit E-Antrieb.

Wusstest du schon, dass dein momo therapierad. auch mit E-Antrieb ausgestattet werden kann? Der unterstützt dich da, wo deine eigene Kraft nicht ganz ausreicht. Sei es bei kurzen oder langen Fahrten in die Stadt oder an den See.

Die Grundlage unseres Systems ist der DirectPower E-Antrieb von Heinzmann im Vorderrad. Hierbei handelt es sich um einen geräuschlosen Direktantrieb, der optional mit einer Anfahrhilfe erhältlich ist.

Für geübte Fahrer gibt es den Antrieb auch in einer „Fortgeschrittenen-Version“. Diese ermöglicht dir einen kraftvolleren Antrieb. Auch bei der „Beginner-Version“ lässt sich über das Display der Eco-, Standard- oder Powermodus ansteuern.

Mit diesem kraftunterstützenden Elektroantrieb bieten wir eine ideale Ergänzung für dein **momo therapierad.** und helfen dir gesteckte Ziele zu erreichen.

Für eine individuelle Beratung stehen wir gerne zur Verfügung.

DirectPower E-Bike Motor

ist bürstenlos und ohne Getriebe konstruiert, minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß und lässt Motorgeräusche entfallen.



Taster- oder Drehgriffbedienung

ermöglicht dir auch während der Fahrt, den Modus und ggf. die Anfahrhilfe einzustellen.



LCD-Display

zeigt dir Angaben zu Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit und Akkustatus - ist gut lesbar auch in heller / sonniger Umgebung.





**Der Akku kann zum Laden auch
herausgenommen werden.
Der Ladezustand lässt sich am
Display ablesen.**

