



Autositze 2025

**ECE R129/03
ZERTIFIZIERT**

ECE R129 Norm



- Gültig seit 2013 (R129/01),
2017 (R129/02) bzw. 2019 (R129/03)
- Einteilung nach Größe, statt Gewicht
(vom Kindersitzhersteller selbst festgelegt)
- Vorwärtsfahren erst ab 15 Monaten
(empfohlen erst ab 2 Jahren)
- Autositze müssen Seitenaufpralltest bestehen



61 -
105 cm

marie integral.



100 -
150 cm

charlie integral.

marie integral.



Sicher voraus!

Ich bin deine sichere Begleiterin für unterwegs.

Mit Blick
entgegen der
Fahrtrichtung.

0 bis
16,5 kg



Komfortables
Ein- und
Aussteigen.



Mit Blick in
Fahrtrichtung.

9 bis
16,5 kg



Highlights der **marie integral**.

- **Beckenführungspolster**
- **5-Punkt-Gurt** montiert mit **Stützpulster** und Schultergurtpolstern
- **Asymmetrische, höhen- und weiteneinstellbare** Thoraxpelotten
- **Kopfstütze** mit Zusatzkeilen
- **Side Impact Buddy**
- **Vier verschiedene Ruhe- bzw. Sitzpositionen**
- **Magnete sichern Gurte** beim Transfer
- **Eye-Level-Indikator**

Vorteile der **marie integral**.

- **EPP statt EPS beim Aufprall**
EPP – „shape memory-Effekt“
EPS – sehr porös, bricht/zerbeult schnell
- **Vollständig recyclebar**
(ohne umweltschädliche Stoffe)
- **Die Verriegelung zur Einstellung in Fahrtrichtung** bei zu geringer Körpergröße **verhindert fehlerhafte Kundenanwendung**



marie integral.



Mehr Sicherheit.

Die EPP-Schalenstruktur
des Sitzes bietet einen
verbesserten Aufprallschutz.

Thoraxpelotten
sind in der Breite anpassbar.

Isfix-Halterung
für eine einfache und
sichere Installation im Auto.

360° Rotation
für komfortables
Hineinsetzen & Herausheben.

Kopfstütze
kann in der Höhe verändert werden.

Mit dem 5-Punkt-Gurt
bleibt dein Kind sicher an seinem Platz.

Abduktionskeil
ermöglicht einen optimalen Halt.

Verstellbarer Neigungswinkel
für 4 verschiedene Sitz-
und Liegepositionen.

Fußbank
zur Entlastung der
Beine, des Rückens
und des Nackens.

Höhenverstellung der Fußbank
so wächst der Autositz
problemlos mit.



FÜR DIE KLEINEN UND
NICHT MEHR SO KLEINEN
61-105 cm, bis zu 16,5 kg



360° SICHERHEIT
Vorwärts und rückwärts gerichtet



ECE R129/03
Zertifiziert für höchste
Sicherheitsanforderungen

**ECE R129/03
ZERTIFIZIERT**



A young child with curly hair is sitting in a grey and black car seat, looking out the window with an open mouth. The child is holding a colorful toy. The car seat has "maxi-cosi" and "maxi" written on it. The background is a blurred view of the outside world.


Maße.

Empf. Körpergröße	61-105 cm
Empf. Körpergewicht	Max. 16,5 kg
Länge	76 cm
Breite	43 cm
Höhe	61 cm
Sitzhöhe	12,5 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)
Sitztiefe	28 cm
Sitzbreite	28 cm
Armlehnenhöhe	34 cm
Rückenhöhe	Max. 41 cm
Rückenlehnenwinkel	Rückwärtsgerichtet: 34,5°-49,5°; Vorwärtsgerichtet: 59,5°- 74,5° gem. zu horizontalen Ebene.
Kopfstützenhöhe	19 cm
Höhe Fußstütze/Fußbank	-2 cm bis + 16 cm zur horizontalen Fläche
Gewicht	15,6 kg
Max. Belastbarkeit	16,5 kg
Befestigung der Sicherung	5-Punkt-Gurt
HMV-Nr.	26.11.06.0035

Empf. Körpergröße	61-105 cm
Empf. Körpergewicht	Max. 16,5 kg
Länge	76 cm
Breite	43 cm
Höhe	61 cm
Sitzhöhe	12,5 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)
Sitztiefe	28 cm
Sitzbreite	28 cm
Armlehnenhöhe	34 cm
Rückenhöhe	Max. 41 cm
Rückenlehnenwinkel	Rückwärtsgerichtet: 34,5°-49,5°; Vorwärtsgerichtet: 59,5° - 74,5° gem. zu horizontalen Ebene.
Kopfstützenhöhe	19 cm
Höhe Fußstütze/Fußbank	-2 cm bis + 16 cm zur horizontalen Fläche
Gewicht	15,6 kg
Max. Belastbarkeit	16,5 kg
Befestigung der Sicherung	5-Punkt-Gurt
HMV-Nr.	26.11.06.0035

Grundmodell.

- 5-Punkt-Gurt montiert mit Stützpolster und Schultergurtpolstern
- Beckenführungspolster
- Kopfstütze mit Zusatzkeilen
- Höhen- und weiteneinstellbare Thoraxpelotten

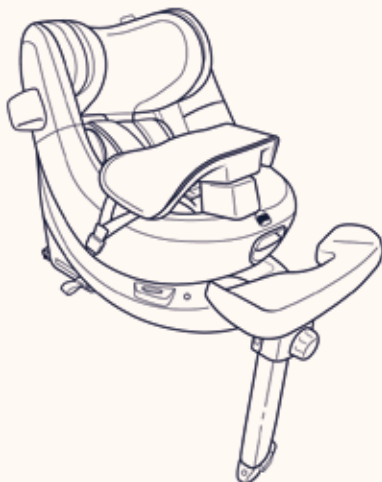

Zubehör.

Abduktionskeil



Abduktionskeil mit zusätzlichem Stütz- und Armauflagepolster



Fußstütze höhenverstellbar



Sonnenschutz



Autositzschoner – kompatibel mit allen Autositzen

- Hochwertiges und rutschf. Neopren
- Zwei praktische, kinderfreundliche Vordertaschen
- Einfache Montage an der Kopfstütze



Fußsack

- Wasserabweisendes und winddichtes Außenmaterial
- Optimale Passform bis zu 105cm Körpergröße
- Einfach von Hand zu waschen



Entspannt ans Ziel!

Ich bin dein cooler Autositz bis ins Teenageralter.



100 -
150 cm

Highlights **charlie integral.**

- **5-Punkt-Gurt mit Brustpolster** oder **Beckengurt** mit Beckenführungspelotte
- **Anatomischer Sitz** mit 26 cm Sitztiefe
- **Thoraxpelotten inkl. Bezug** – höhen- und breiteneinstellbar
- Innovativer **Side Impact Buddy** für zusätzlichen Schutz
- **Mit ISOFIX-Halterung**
- **Höhe der Kopfstütze/Rückenlehne** ganz einfach mit einem Handgriff anpassen

Vorteile **charlie integral.**

- **Optimaler Halt** durch innovative Pelotten, Begurtung und Polster
- **Lange Nutzung** vom Kleinkind- bis zum Teenageralter
- **Mehr Selbstständigkeit** dank geführter Gurte, die eigenes Anschnallen ermöglichen

charlie integral.



Entspannt ans Ziel!



Side Impact Buddy

bietet mehr
Seitenaufprallschutz.

Armauflage

inklusive kleiner
Armstützen.

Isofix-Halterung

für besonders sichere und
einfache Anwendung.



FÜR DIE GRÖßEREN
100 –150 cm
Von ca. 3 bis ca. 12 Jahren



INTUITIVES SICHERN
Jedes Mal richtig anschnallen



I-SIZE, ECE R129/03
Zertifiziert, um die anspruchsvollsten
Sicherheitsvorschriften zu erfüllen



Kopfstütze

lässt sich in der Höhe mit nur
einem Handgriff verändern.

Thoraxpelotten

stabilisieren den Oberkörper.

5-Punkt-Gurt

hält das Kind an den stabilsten
Punkten am Körper.

Abduktionskeil

ermöglicht einen optimalen Halt.

Fußbank

für stabilen Halt und eine
entspannte Sitzposition.

charlie integral.



Maße.

Empf. Körpergröße	100 - 150 cm
Sitzlänge	39 cm
Sitzbreite	43 - 51 cm
Höhe	59 - 79 cm
Sitzhöhe	10,8 - 16 cm (tiefster Punkt zur horiz. Ebene im Sitz)
Sitztiefe	26 - 32 cm (kurze/lange Sitzfläche)
Sitzbreite	30 - 37 cm (Rückenseite/vorne)
Rückenhöhe	29 - 47 cm
Kopfstützenhöhe	23 cm
Unterschenkellänge bei Nutzung der Fußbank	21 - 42 cm
Gewicht	7,7 kg
Max. Belastbarkeit	45 kg
HMV-Nr.	26.11.06.0xxx (in Beantragung)



Grundmodell 1.

mit 5-Punkt-Gurt und kleinem Brustpolster

Zubehör nur für Grundmodell 1:



Beckenführungspolster



Brustpolster groß



Grundmodell 2.

mit Beckengurt und Beckenführungspelotte

Zubehör nur für Grundmodell 2:



Weste



charlie integral.



Zubehör.

Schwenkvorrichtung



Abduktionskeil



**Armauflage
inkl. kleiner Armstützen**



**Armauflage inkl. Seiten-
führung d. Oberschenkel**

**Sitztiefenverlängerung
auf 32 cm**

**Unterleg-Keil
für mehr Sitzwinkel**



**Ergonomisch geformte
Fußbank**



**Stützkissen für Kopf
und Hals**



Sonnenschutz



Autositzschoner
– kompatibel
mit allen
Autositzen





schuchmann.de